



Návod k použití

BOOSTER PRO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hlavní technická příručka

6-in-1 BOOSTER PRO

BOOSTER PRO je zařízení na vyhlazení pleti se šesti klíčovými funkcemi, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů v oblasti pokožky. Toto revoluční zařízení přináší viditelné zlepšení, co se týče zářivosti, objemu, pružnosti, zjemnění porů a sonických vibrací.



Využijte svůj BOOSTER PRO na maximum

Stáhněte si aplikaci AGE-R zdarma, a používejte AGE-R BOOSTER PRO profesionálnějším a pohodlnějším způsobem.

*Naskenujte QR kód, nebo v obchodě s aplikacemi vyhledejte „AGE-R“.

Informace o produktu

Návod k použití

- Pro zapnutí produktu stiskněte a podržte tlačítko ❸ Power na dobu 2-3 sekund. Po zapnutí napájení se zvukovým efektem ON rozsvítí ❷ LCD obrazovka a automaticky se nastaví režim Booster na úroveň 1.
- Pro volbu požadovaného režimu jednou krátko stiskněte tlačítko režimu ❹ Mode. Při každém stisknutí tlačítka režimu Mode ❹ se režim zobrazí na obrazovce LCD ❷ a při každé změně režimu se, spolu s hlasovým průvodcem režimu, na barevném displeji LED ❸ zobrazí barva LED, specifická pro režim.
- Režimy se mění v následujícím pořadí:
Režim Booster → Režim MC → Režim Derma Shot → Režim Air Shot
- Po nastavení režimu krátce stiskněte tlačítko Level ❸ pro nastavení úrovně. S každým stiskem tlačítka se úroveň zvýší o jednu, a upravená úroveň se zobrazí na obrazovce LCD ❷. *Můžete nastavit úroveň 1 až 5, a při prvním použití se doporučuje začít s úrovní 1.

- Jakmile nastavíte režim a úroveň, použijte produkt podle konkrétních pokynů pro každý režim. Před použitím se nezapomeňte seznámit s pokyny pro každý režim.
- Během používání bude doba použití oznamována každou minutu. Pokud produkt používáte déle než 5 minut, na displeji LCD ❷ se zobrazí obrazovka čekání na změnu režimu, spolu s oznámením o dokončení. Pokud během 10 sekund nestisknete žádné tlačítko nebo neprovedete nějakou operaci v aplikaci, přístroj se automaticky vypne. Chcete-li použít další režim, jednou za 10 sekund krátce stiskněte tlačítko režimu ❹ a režim změníte.
- Pro hygienické použití nezapomeňte po použití hlavu ❶ důkladně vyčistit suchým hadříkem nebo bavlněnou podkožkou, a uložte ji.
- Nabíjení provádějte připojením přiložené nabíječky typu C k nabíjecímu portu ❸ na spodní zadní straně produktu.
- Během nabíjení se na ❷ LCD obrazovce zobrazí stav nabíjení, spolu se zvukem připojení nabíjení, a produkt nebude fungovat.

01

Opatření během používání a skladování

Opatření během použití

- Dbejte na to, abyste zařízení neupustili nebo s ním nepraštili, protože by to mohlo způsobit poruchu nebo poškození.
- Dbejte na to, aby dovnit hlavní jednotky nepronikla voda ani kosmetika.
- Pokud produkt nefunguje správně, nerozebírejte jej a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Ostrahujte veškeré kovové příslušenství na těle uživatele.
- Zařízení nepoužívejte spolu s elektrickými spotřebiči, jako jsou elektrické zahřívací podkožky.
- Zařízení nepoužívejte na horkých místech, jako je v blízkosti ohně nebo na přímém slunečním světle, a hlavní jednotku nebo kabel neponechávejte v blízkosti topných zařízení.
- Během používání neponechávejte zařízení déleš dobu pracovat v jedné oblasti; nezapomeňte s ním neustále pohybovat.
- Při používání zařízení buďte opatrní, protože pokud přijde do styku s jinými produkty, může dojít k poruše.
- Zařízení nepoužívejte pro jiné účely, než k původnímu účelu; mohlo by dojít k nehodám.
- Toto zařízení nepoužívejte, pokud pravidelně trpíte paralýzou nebo máte potíže s vyjadřováním.
- Hlavou, která se přichází do kontaktu s pokožkou, neklepejte přímo na tvrdé plochy; protože by mohlo dojít k nehodám.
- Hlavní jednotku nebouchajte do tvrdých předmětů.
- Zařízení nepoužívejte při vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo v prašném prostředí, například v koupelnách, kuchyních a horkých autech.
- Při používání dodržujte odstup od elektrických spotřebičů, například jiných kosmetických přístrojů, televizorů a nářadí.
- Nepoužívejte v uzavřené oblasti, na zraněních nebo v oblastech, kde byly provedeny zákroky nebo operace.
- Zařízení nepoužívejte při jiném, než jmenovaném napětí. Použití tam, kde je jmenovitá hodnota překročena, může způsobit přehřátí přístroje, které může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- S mokrou rukou se zařízením nemanipulujte, ani neodpojujte nabíjecí kabel; může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se hlavní jednotku opravit, rozbrat nebo upravit sami; mohli byste způsobit poruchy.
- Během nabíjení nebude zařízení fungovat.
- Pro správný kontakt s pokožkou držte hlavní část zařízení pevně.
- Abyste bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát, musí být děti pod dohledem.
- Tento spotřebič nesmí být používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jímž nebyl zajištěn dohled nebo instrukce.

Opatření pro skladování

- Skádejte mimo dosah dětí a v místě bez vlhkosti.
- Neskládejte na místech, kde se vytváří magnetická pole nebo elektromagnetické vlny; mohly by způsobit poruchy.
- Pro použití vyčistěte hlavu vlněným ubrouskem, čistým hadříkem nebo měkkým ručníkem, a zařízení skladujte v suchu.
- Před učištěním se ujistěte, zda je zařízení vypnuto.
- Pro čištění nepoužívejte hořlavé látky, jako je benzin nebo benzen, protože mohou způsobit chemické reakce, změnu barvy a deformaci.

Upozornění pro uživatele

Pokud trpíte špatným zdravotním stavem, konzumovali jste alkohol, v současné době užíváte prášky na spaní, jste unavení nebo jste pod lékařským dohledem, zařízení nepoužívejte. Pokud během používání pociťte bolest nebo neobvyklé příznaky, okamžitě používání přerušete.

Opakované použití zařízení na stejném místě nebo nesprávné použití může způsobit poškození kůže. Pokud se na kůži objeví jakákoliv abnormalita, postížené místo ochlaďte a okamžitě vyhledejte lékaře.

* Při pravidelném používání mohou osoby s citlivou pokožkou zažít mírné zarudnutí.

Přivšim si přecházejte pokyny a bezpečnostní opatření, a proveďte řádnou následnou péči.

Zařízení nepoužívejte, patřte-li do následujících skupin:

- Osoby s příznaky zarudnutí a píchání v důsledku nadměrného opalování
- Osoby s alergiemi, zejména ti s citlivou pokožkou
- Osoby, které používají elektronická zařízení, nošená přímo v těle, jako jsou kardiostimulátory
- Osoby, které používají elektronické zdravotnické prostředky na podporu života, jako jsou kardiopulmonální přístroje
- Osoby, které používají implantované elektronické zdravotnické prostředky, jako jsou elektrokardiografické přístroje
- Osoby, které po delší dobu užívají hormonální léky na bázi steroidů
- Osoby s poruchami jaterních funkcí, které mají v oběhovém systému příznaky cévních dilačních syndromů

02

- Osoby, které podstupují ambulantní léčbu
- V oblastech se zarudlým klně
- V oblastech s dermatitidou, způsobenou kosmetikou nebo jedincí s atopickou dermatidou
- Oblasti s nedokonalostmi, které doprovází svědění, nebo oblasti s nedokonalostmi, způsobenými fyzickým podrážděním
- Oblasti s kovovými, plastovými, silikonovými nebo jinými cizími předměty v těle
- Pacienti s poruchami kve, srdečními chorobami, akutními chorobami, krvácivými oblastmi, zhoubnými nádory, zlomeninami, infekčními chorobami, na oční víčka, oblasti s traumatické, lebeční oblasti a na malých dětech, těhotných ženách, kojících ženách a starších osobách
- *Tento produkt je určen pouze pro kosmetické použití. Tento produkt není určen pro diagnostiku, léčbu, ošetření nebo prevenci jakékoli nemoci. Před použitím si přečtete všechny pokyny a varování. Používejte jen podle pokynů.
- Máte-li jakékoli zdravotní problémy nebo onemocnění, před použitím zařízení se vždy poraďte se zdravotnickým odborníkem.

Technické údaje

Název modelu: ME-BPRO-K Název produktu: MEDICUBE AGE-R BOOSTER PRO

E-mailová adresa: medicube_eurcs@apr-in.com

Výrobce: APR Factory Co., Ltd.

Adresa: 2nd Floor, 107 Gasan Digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, South Korea (Gasan-dong) 50,

Wonsokjeongyongso-gil, Posing-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Registrační číslo certifikace KC R-R-pg1-ME-BPRO

FCC ID Number: 2AC7Z-ESPS3WROOM1

Určený účel použití: Masážní zařízení pro krásný obličej

Specifikace baterie

Indikace kvality v souladu se zákonem o kontrole bezpečnosti elektrických spotřebičů a spotřebních výrobků č. YU101535-23001

Název modelu: DTP18650-26F

Název produktu: Baterie (Válcová Li-ion dobíjecí baterie) Jmenovité napětí: 3.7 V / 2,600 mAh

Název výrobce: Shenzhen Data Power Technology Ltd. Země výroby: Čína

Datum výroby: Je uvedeno samostatně na dně produktu

Technické údaje výrobku

Velikost produktu: 34*177.3mm Vstupní napětí: DC 5V / 2A (USB-C)

Baterie: Lithium-iontová. 3.7 V / 2,600 mAh Spotřeba energie: max. 1.8 Watt (3.7 V x 0.5 A)

Hmotnost: 155 g. Doba nabíjení: Přibližně 4 hodiny

VÝROBENO V KOREJI

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Jeho provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nechtěný provoz.



Tento přístroj byl testován a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení slouží k zajištění dostatečné ochrany před nežádoucím rušením při použití zařízení v obytných prostorách. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. V případě neuposlechnutí pokynů výrobce ohledně jeho instalace a použití může docházet k rušení radiokomunikace. Není nicméně možné zajistit, že v konkrétních instalacích k rušení docházet nebude. Pokud i po vypnutí a opětovném zapnutí způsobuje zařízení škodlivé rušení přijmu rozhlasu nebo televize, doporučujeme zkusit jej odstranit jedním z níže uvedených způsobů:

- Změnou orientace nebo přemístěním přijímač antény.
- Zvýšením vzdálenosti mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojením zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátit se na prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Upozornění na FCC:

Změny a úpravy, které nebyly výslovně schváleny osobou odpovídající za udělení shody s předpisy, mohou zneplatnit oprávnění uživatele pro práci se zařízením.

03

Výměna / vrácení zboží

1. Záruka

Pro všechna zařízení Age-R nabízíme 2 roky omezené záruky od data původního nákupu. Pokud zařízení nefunguje správně kvůli vadě výrobce, vadné zařízení bezplatně vyměníme do 2 let. Tato záruka se nevztahuje na zařízení, poškozené: 1) Při nehodě, nesprávném použití nebo opravě 2) Použití s neautorizovaným příslušenstvím, nebo jiné než předepsané použití. 3) Připojením k nesprávnému proudu a napětí (poskytujeme jen kabel typu USB C) Tato záruka se produkuje pouze v případě, že jsou zařízení používána s autorizovaným příslušenstvím zařízení (například s přiloženými nabíjecími kabely).

2. Vratky

U zařízení Age-R musí být všechny vrácení požadovány prostřednictvím místa nákupu do 30 dnů od data nákupu. Vrazení a výměny z důvodu změny názoru jsou přijímány pouze u neotevřených a nepoužitých produktů, přičemž náklady na zpětné zasílání hradí zákazník. V případě závad nebo počátečních poruch během používání kontaktujte místo nákupu pro další pomoc.

Doporučený způsob likvidace a nabíjení lithiové baterie

Varování: Protože může existovat nebezpečí, jako je přehřátí, požár a výbuch, dodržujte následující pokyny. **1) Na manipulaci záleží.** Pokud vizuálně identifikujete nafouklé baterie, může to znamenat nebezpečí, a okamžitě kontaktujte výrobce nebo prodejce. Používejte pouze určenou nabíječku. Chraňte před ohněm (nedávejte do mikrovlnné trouby). V létě ji nenechávejte v autě. Neskládejte, ani nepoužívejte při vysokých teplotách a na vlhkých místech, například v sauně. Produkt nepoužívejte po dlouhou dobu, pokud je položen na přikryvce, elektrické podložce nebo koberci. Pokud necháte zapnuté napájení, neskládejte v těsném prostoru. Vynarujte se kontaktu elektrického terminálu s kovovými produkty, například s náhradečkami, mincemi, klíčem a hodinkami. Použijte náhradní lithiovou baterii, zaručenou výrobcem. Nesnažte se baterii rozbit, dít ani probodnout. Vynarujte se abnormálních nárazů, například pádům z výšky. Nevystavujte teplotě nad 50 °C. Vynarujte se vlhkosti.

2) Pokyny pro likvidaci. Výbodu baterii nelikvidujte podle vlastního uvážení. Baterii při likvidaci nezapalujte ani ji neválejte do ohně. V důsledku šráru může dojít k výbuchu a požáru. Způsob likvidace baterie se může lišit v závislosti na zemích a oblastech. Zlikvidujte ji vhodným způsobem.

3) Doporučení, týkající se způsobu nabíjení. Baterii nenabíjejte jiným způsobem, než je uvedeno v uživatelské příručce. Může dojít k požáru nebo výbuchu.

Doba kompletního nabití: Přibližně 4 hodiny


*Doba nabíjení se může lišit v závislosti na množství zbytkové energie v baterii nebo na okolní teplotě nebo prostředí nabíjení. Pro zlepšení výkonu může bez předchozího upozornění dojít ke změnám ve specifikacích a vnějším vzhledu.

Přečtete si uživatelskou příručku a pokyny.
Obrázky v příručce jsou pouze pro demonstrační účely.

Copyright © srpen 2024, APR Corp.
Všechna práva vyhrazena.

medicube.us

04

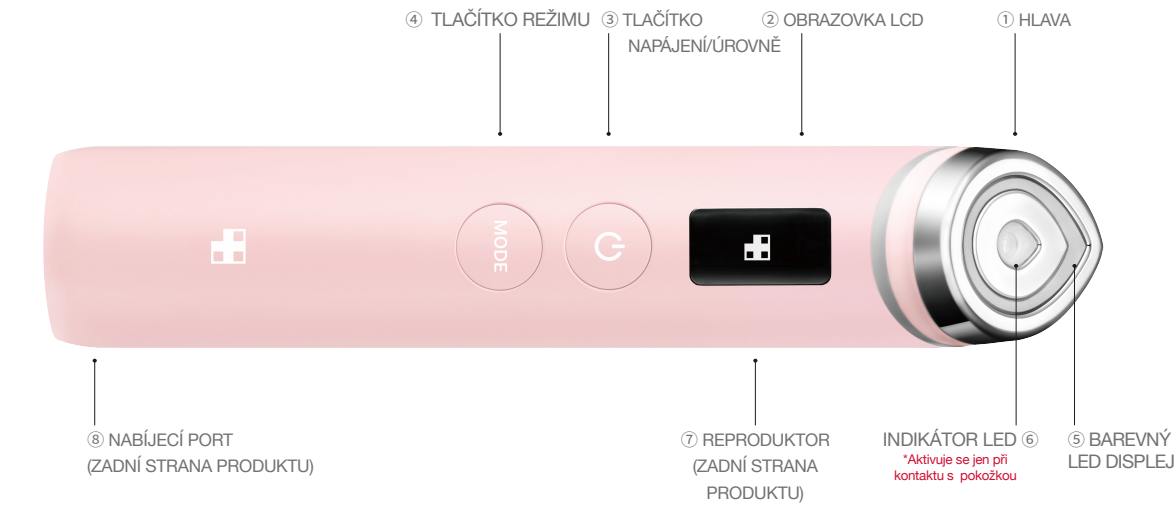

05

Přehled hlavního režimu

Před použitím se nezapomeňte seznámit s metodami použití a s doporučenými frekvencemi pro každý režim.

REŽIM BOOSTER | Oranžová LED



Režim zesílení jasu

Přejíždáním po kůži lze použít s různými typy kosmetických přípravků a pleťových masek.

Doporučená frekvence 1-3x denně (5-10 minut na jedno použití)

Pokyny k použití

Aplikujte produkt na péči o pleť, a přístroj použijte pohybem zespodu nahoru směrem od vnitřní k vnější straně obličeje.

REŽIM DERMA SHOT | Červená LED



Režim Elasticity Derma Shot

Lze používat s různými typy kosmetických přípravků a pleťových masek pro uvolnění obličejových svalů.

Doporučená frekvence 1-3x denně (5-10 minut na jedno použití)

Pokyny k použití

Naneste přiměřené množství přípravku pro péči o pleť, a pomalu pohybujte přístrojem po pokožce. Ve svalových bodech udělejte dvousekundovou pauzu na uvolnění svalů.

REŽIM MC | Zelená LED



Režim Line MC

Je možno použít s přípravky na péči o pleť a s pleťovými maskami pro zvláštění objemu vzhledu linek.

Doporučená frekvence 1-3x denně (5-10 minut na jedno použití)

Pokyny k použití

Aplikujte produkt na péči o pleť, a přístroj použijte pohybem zespodu nahoru směrem od vnitřní k vnější straně obličeje.

REŽIM AIR SHOT | Červená LED



Režim Pores Air Shot

Lze použít na suchou pokožku, pro péči o póry a odumřelé kožní buňky.

Doporučená frekvence 2-3x denně (5 minut na jedno použití)

Pokyny k použití

Po vyčištění a vysušení pokožky jemně přejíždějte okrajem hlavy po obličeji.

06

Sekvence režimů

*Pokud jsou ve stejný den používány různé režimy, doporučujeme postupovat podle této sekvence.



INDIKACE LED

*Barvy LED pro každý režim jsou přednastaveny, a změny barev LED lze provádět pouze prostřednictvím aplikace AGE-R.



Modrá



Oranžová



Zelená



Červená



Purpurová

Opatření před použitím

*Při prvním použití začněte s nejnižším nastavením, které během používání podle potřeby upravte.



Zakázané oblasti použití

Nepoužívejte v uvulární oblasti, na otevřené rány nebo v oblastech, kde byly provedeny zákroky nebo operace.



Doporučené oblasti pro použití s nízkými úrovněmi

V citlivých oblastech, jako jsou oči, nos a ústa, doporučujeme použití nízkých úrovní.



Frekvence používání

Pro každý režim použijte doporučenou frekvenci.


Součásti produktu

Hlavní jednotka, nabíjecí kabel USB, uživatelská příručka

07

Pokyny pro připojení Bluetooth

*Ujistěte se, zda je Bluetooth vašeho smartphonu zapnutý, a BOOSTER PRO je zapnutý pro párování.

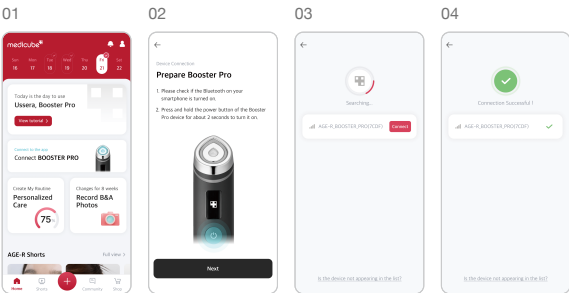

01. Otevřete aplikaci AGE-R a klikněte na možnost „Connect BOOSTER PRO“.
02. Zapněte Bluetooth ve svém smartphonu a zapněte BOOSTER PRO.
03. Po potvrzení detekovaného zařízení klikněte na ikonu „Connect (Připojit)“.
04. Zkontrolujte, zda je obrazovka „Connection Successful (Připojení úspěšné)“ zobrazena správně, a zda v aplikaci BOOSTER PRO zazní zvuk připojení Bluetooth.

Opatření při připojení přes Bluetooth

01. Dálkové ovládání

- Funkce dálkového ovládání funguje pouze při připojení k zařízení, a funkce, jako je změna barvy LED, ovládání hlasitosti a zapnutí/vypnutí vibrací, jsou dostupné jen v rámci funkce dálkového ovládání po připojení Bluetooth.
- Nastavení úrovně hlasitosti a nastavení vibrací ON/OFF, které nakonfigurujete v dálkovém ovládání, budou uloženy jako výchozí hodnoty, ale změny barev LED uloženy nebudou.

02. Automatické zprávy

- Historie používání, je-li zařízení používáno bez připojení k aplikaci, se dočasně ukládá v zařízení, a po připojení se automaticky nahraje do zprávy aplikace.
- Úroveň intenzity a barvy LED, specifické pro daný režim, jsou ve zprávě uloženy jako nejdelší použitá úroveň a barva.

03. Výchozí změny barev LED pro každý režim

- Změna výchozí barvy LED pro každý režim je možná pouze při připojení zařízení, a lze ji provést na kartě „Settings (Nastavení)“.

04. Připojení zařízení selhalo

- Ujistěte se, zda není zařízení připojeno k jinému smartphonu. Je-li k jinému smartphonu připojeno, odpojte je od aplikace připojeného smartphonu tím, že přejdete na [Banner BOOSTER PRO] → [Settings (Nastavení)] → [Device Disconnect (Odpojit zařízení)], a zkuste to znovu.

05. Přepnutí na jiný smartphon

- Pokud chcete zařízení připojit k jinému smartphonu, nejprve spusťte aplikaci na aktuálně připojeném smartphonu. Přejděte na [Banner BOOSTER PRO] → [Settings (Nastavení)] → [Device Disconnect (Odpojit zařízení)], odpojte jej a zkuste připojit k novému smartphonu.



Dostupné pouze v případě, že je Bluetooth párován

- Změny barev, specifické pro režim • Sonické vibrace ZAP/VYP
- Ovládání hlasitosti • Kontrola zpráv o péči

08

Přehled obrazovky LCD



Výchozí obrazovka

01. Indikátor Bluetooth
02. Indikátor baterie
03. Aktuální režim použití
04. Úroveň intenzity
05. Doba péče



Obrazovka při čekání na změnu režimu po 5minutové péči

01. Odpočítávání automatického vypnutí
02. Pokyny pro dodatečnou péči Tlačítko MODE a ovládání aplikace je možno použít k přepnutí do jiného režimu.



Obrazovka nabíjení

01. Obrazovka nabíjení Je zobrazena zeleně, čímž vám umožňuje sledovat stav nabíjení. (*Nefunguje během nabíjení)
02. Obrazovka plného nabití



Celý kruh je zobrazen zeleně.



Obrazovka vybité baterie

02. Obrazovka vybité baterie Je-li baterie vybitá, zobrazí se červeně jako indikátor, že je vyžadováno nabití.

09