


## MASÁŽNÍ STROJEK

TB-1613A  
TB-1613AS

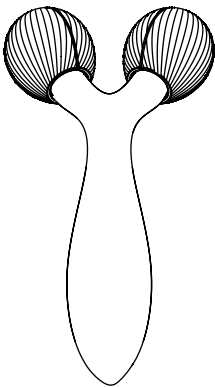

### CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečně zajištění správné funkce tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

##### ⚠️ VAROVÁNÍ:

- Toto zařízení by neměly používat:
  - Tehotné nebo kojící ženy
  - Osoby s alergiemi
  - Osoby s povrchovými poraněními, popraskanou kůží, boulemi, jinými závažnými kožními stavy nebo s kožními nemocemi v oblasti použití.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozeno nebo vypadá být poškozeno.
- Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat a poradte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami upravovat, rozebírat nebo opravovat.

##### ⚠️ POZOR:

- Nesdílejte jedno zařízení s více lidmi.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.

#### SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

- Název: Masážní strojek
- Modelové číslo: TB-1613A
- Podnikový standard: Q/MMU1019-2016


#### POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Masážní strojek
2. Rukojeť
3. Skladovací taška
4. Čistič hadřík

#### POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

※ Příklad použití masážního stroje na kůži pod různými úhly k zvýšení účinnosti masáže. Může být použit na obličej a tělo jak je doporučeno níže:

- 1) **Masáž obličeje:** Jemně posouváte válečky od čelisti k vaší lícní kosti.  
Poté pomalu posouváte válečky směrem od koutků úst k uchu.
- 2) **Masáž krku:** Jemně posouváte válečky od ramene ke krku a čelisti.
- 3) **Masáž paží:** Opatrně posouváte válečky podél paže.
- 4) **Masáž hrudníku:** Opatrně posouváte válečky z podpaží do středu hrudníku.
- 5) **Masáž pasu:** Masírujte pas jemným pohybem válečků nahoru a dolů.
- 6) **Masáž nohou:** Jemně posouváte válečky od kotníků ke stehnům.

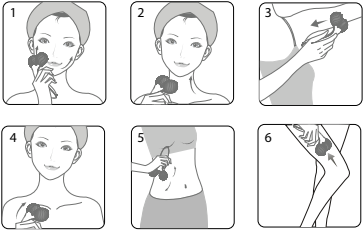

#### ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- 1) Neponořujte toto zařízení do vody. Zařízení čistěte suchým hadříkem nebo hadříkem navlhčenou ve vodě.
- 2) K čištění nikdy nepoužívejte drátěnku, abrazivní čisticí prostředky ani korozivní kapaliny.
- 3) Na tento výrobek nikdy nepoužívejte maziva, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.

#### SERVIS

##### 1. Ekologické tipy

Nevyházejte tento produkt do běžného komunálního odpadu, místo toho jej odevzdejte v sběrném bodě.

##### 2. Odstraňování problémů

| Problém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Možná příčina                              | Řešení                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Masážní válečky se neotáčejí plynule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V mezeře mezi válečky se hromadí nečistoty | Vyčistěte mezeru mezi válečky |
| Další problémy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Kontaktujte svého prodejce    |
| Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.<br>Záruční opravy zařízení uplatňujete u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu.<br>Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. |                                            |                               |

##### 3. Záruka a servis

Pokud potřebujete servis, informace nebo máte-li jakékoli pochybnosti, navštivte webové stránky TOUCHBeauty na adrese [www.touchbeauty.cz](http://www.touchbeauty.cz) nebo kontaktujte prodejce.

#### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD tímto prohlašuje, že všechna zařízení TouchBeauty jsou v shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu [www.touchbeauty.cz](http://www.touchbeauty.cz).

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty)

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

#### VÝROBCE


TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD  
29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China

#### DOVOZCE

elem6 s.r.o.  
Bražkova 308/15, 161 00 Praha 6, Česká Republika  
Vyrobeno v Číně.

## MASÁŽNY STROJČEK

TB-1613A  
TB-1613AS

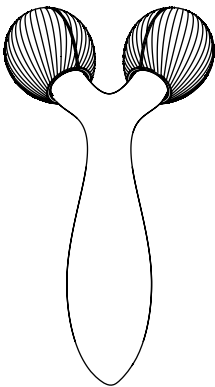

### SK – NÁVOD NA POUŽITIE

#### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaisťovanie správneho fungovania tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

##### ⚠️ VÝSTRAHA:

- Nepoužívajte toto zariadenie za nasledujúcich podmienok:
  - Tehotné alebo dojčiacie ženy
  - Osoby s alergiou
  - Osoby s povrchovými zraneniami, popraskanou kožou, hrčkami, inými závažnými kožnými stavmi alebo kožnými chorobami v oblasti použitia.
- Predtým, ako začnete zariadenie používať, vyskúšajte ho. Nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené alebo sa javí poškodené.
- Ak sa necítite dobre, ihneď prestaňte zariadenie používať a poradte sa s lekárom.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať, rozoberať alebo opravovať.

##### ⚠️ POZOR:

- Nezdierajte to isté zariadenie s inými ľuďmi.
- Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predĺžili jeho životnosť.

#### ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

- Název: Masážní strojek
- Modelové číslo: TB-1613A
- Podnikový označenie: Q/MMU1019-2016


#### POPIS ZARIADENIA

1. Masážní strojek
2. Rukojeť
3. Skladovací taška
4. Čistič hadrička

#### POUŽÍVANIE ZARIADENIA

※ Na zvýšenie účinnosti masáže aplikujte masážny strojek na pokožku pod rôznymi uhlami. Môže sa použiť na tvár a telo, ako sa odporúča nižšie:

- 1) **Masáž tváre:** Opatrne posúvajte valčeky od čeluste k lícnjej kosti.  
Potom pomaly posúvajte valčeky od kútika úst k uchu.
- 2) **Masáž krku:** Opatrne posúvajte valčeky od ramena po krk a líniu čelusti.
- 3) **Masáž rúk:** Opatrne posúvajte valčeky pozdĺž ramena.
- 4) **Masáž hrudníka:** Opatrne posúvajte valčeky od podpažia do stredu hrudníka.
- 5) **Masáž pasu:** Masírujte pás jemným pohybom valčekov hore a dole.
- 6) **Masáž nôh:** Opatrne posúvajte valčeky od členkov po stehná.

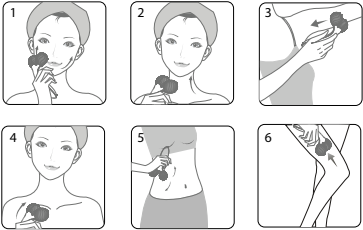

#### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- 1) Neponořajte toto zariadenie do vody. Zariadenie čistite suchou handričkou alebo handričkou navlhčenou vo vode.
- 2) Na čistenie zariadenia nepoužívajte drátěnku, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny.
- 3) Na toto zariadenie nikdy nepoužívajte žiadne mazivá, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky alebo osviežovače vzduchu.

#### ÚDRŽBA

##### 1. Tipy ohľadujúce k životnému prostrediu

Nelikvidujte toto zariadenie spolu s bežným domovým odpadom. Namiesto toho ho odevzdajte autorizovanému miestu na recykláciu.

##### 2. Riešenie problémov

| Problém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Možná příčina                                  | Riešenie                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Masážne valčeky sa neotáčajú plynule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V medzere medzi valčkami sa hromadia nečistoty | Vyčistite medzeru medzi valčkami |
| Inné problémy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Kontaktujte predajcu             |
| Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.<br>Záruční opravy zariadenia uplatňujete u svojho predajcu. V prípade technických problémů a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidla pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. |                                                |                                  |

##### 3. Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte pochybnosti, navštívte webovú stránku TOUCHBeauty na adrese [www.touchbeauty.cz](http://www.touchbeauty.cz) alebo kontaktujte predajcu.

#### PREHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD týmto prehlasuje, že všetky zariadenia TouchBeauty sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ. Produkty sú určené na predaj bez obmedzení v Nemecku, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Prehlásenie o zhode je možné stiahnuť z webu [www.touchbeauty.cz](http://www.touchbeauty.cz).

Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neštandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním. Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Viac informácií ohľadom záruky nájdete na [www.elem6.com/warranty](http://www.elem6.com/warranty)

Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo nesprávnym používaním produktu.

#### VÝROBCA

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD  
29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China

#### DOVOZCA

elem6 s.r.o.  
Bražkova 308/15, 161 00 Praha 6, Česká Republika  
Vyrobené v Číně.