



FALI6 – Návod k použití CZ

UPOZORNĚNÍ

Prosím, pozorně si přečtěte veškeré instrukce a ponechte si je pro budoucí použití.

- **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud jste těhotná nebo máte kardiostimulátor, epilepsii, cukrovku, sklerózu multiplex nebo pokud se zotavujete po operaci.
- Zvyšte pozornost při použití kontaktů v blízkosti očí. Dodržujte odstup kontaktů nejméně 1 cm od očí.
- **NEPOUŽÍVEJTE** na místech postižených rosaceou, na zánětlivém akné, odřeném kůži, citlivé kůži ani na jizvách, mateřském znamínku nebo křečových žilách.
- Pokud se gel dostane do kontaktu s očima, důkladně je vypláchněte vodou. Pokud se objeví podráždění, kontaktujte lékaře.
- Držte mimo dosah dětí a zvířat.

VĚDA

Jak stárneme, naše obličejové svaly ztrácí svůj tonus. Tváře padají, objevuje se druhá brada a přibývají vrásky. Lift Plus kombinuje dvě technologie kosmetických salonů pro lifting, rejuvenaci a omlazení pleti.




Faradický proud – EMS (elektricko-svalová stimulace) Zpevňuje pokleslé rysy obličeje a celkově omlazuje pokožku. S použitím trochy vodivého gelu face lift udělá všechnu těžkou práci za vás. Programy 1 – 3.



Galvanická infuze (iontoforéza) – používá jemný mikro proud pro transport účinných látek hluboko do kůže. S pomocí kolagenovo-retinolových náplastí pomáhá redukovat vrásky a zlepšuje elasticitu pokožky. Program 4.

SEZNAMTE SE LCD DISPLEJ

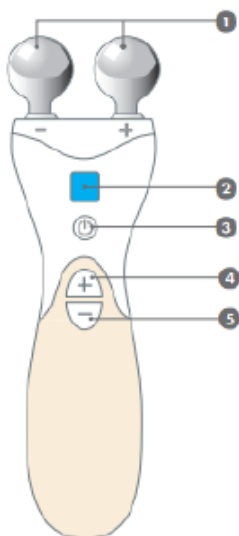

Programy jsou znázorněny písmenem „P“ a číslem.



Intenzita je znázorněna pouze číslem.

Krátkým stiskem (+) nebo (-) tlačítka změníte intenzitu. Stálým podržením tlačítka (+) nebo (-) se rychle posunete přes úrovně intenzity.

Modrý LCD displej zůstane svítit po dobu 5 sekund a pak se vypne, pokud není stisknuto žádné tlačítko.

Auto vypnutí: po 30 minutách bez stisknutí kteréhokoliv tlačítka přístroj pípne a vypne se.


60 sekundový časovač: Jednotka pípnutím každých 60 sekund naznačuje možnost přesunu na jiné místo.

1 Kuličkové kontakty (-) a (+)
4 Tlačítko zvýšení výkonu (+)


2 LCD display
5 Tlačítko snížení výkonu (-)

3 Tlačítko Program On/Off
6 Prostor pro baterie

BATERIE

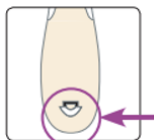

K vložení baterie uvolněte sponu a otevřete kryt. Připojte PP3 9V alkalickou baterii a ujistěte se, že kontakt **+** je připojen podle obrázku. Vložte uvolňovací pásek pod baterii a nasadte kryt na místo.

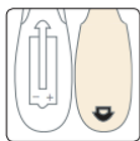

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterii vyndejte.
- **NEPOUŽÍVEJTE** nabíjecí baterie.
- Zajistěte správnou likvidaci starých baterií v souladu s místními předpisy.


TEST SNÁŠENLIVOSTI

Důležité: Vždy proveďte test vodivosti s vodivým gelem na méně viditelném místě kůže pro možné reakce. Počkejte 24 hodin. Pokud se objeví podráždění pokožky, přístroj nepoužívejte. Pokud se objeví kožní reakce po použití kolagenu a retinolu, ošetření s náplastmi neprovádějte.

PROGRAMY & OŠETŘENÍ

Program	Ošetření	Technologie	Intenzita	Gel/Náplasti
P1	Zpevnění Rytmičné dvou sekundové stažení svalů pro získání kondice a krátké tři sekundové pauzy mezi jednotlivými pulsy.	 EMS	1- 20	Vodivý gel
P2	Důkladné zpevnění nabízí maximální procvičení svalů díky přednastavené variaci různé intenzity stahování.	 EMS	1 - 20	Vodivý gel
P3	Poklepávání masážní stimulace svalů. Střídání 5 sekundové masážní akce s 3 sekundovou relaxací.	 EMS	1- 20	Vodivý gel
P4	Iontoforézní infuze Využívá slabý mikro proud k zapracování účinných látek hluboko do pokožky.	 Iontoforéza	1- 10	Kolagenovo-retinolové náplasti a vodivý gel

FARADICKÁ OBLIČEJOVÁ GYMNASTIKA

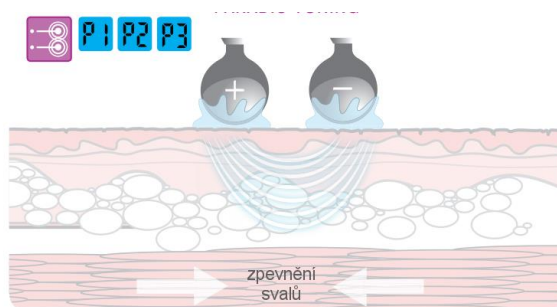

Již více než 40 let se v salónech krásy využívá faradická tonizace s EMS (Elektrická stimulace svalů) pro jemné stahování a uvolňování obličejových svalů pro lifting a zpevnění pleti. Tato stimulace také zvyšuje cirkulaci, což přináší více kyslíku do kožních buněk a rychleji odstraňuje toxiny, zanechává kůži svěží a omlazenou. Rovněž provádí lymfatickou drenáž.


Režim ošetření

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme faradické ošetření provádět každý den po dobu prvních několika týdnů, střídavě programy 1, 2 a 3 každý den. Poté používejte podle potřeby pro udržení zpevněných svalů.

Co budete pociťovat

- Zpočátku ucítíte jemné vibrace, s přidáním intenzity se sval začne stahovat.
- Vaše zuby mohou být citlivé v průběhu ošetření, to je naprosto normální.
- Efektivní ošetření obličeje je založeno na příjemné stimulaci svalů. Pokud máte nepříjemný pocit, přidejte vodivý gel nebo snižte intenzitu, případně se přesuňte na jinou oblast.
- Před přesunutím na jinou oblast snižte intenzitu.


OBLASTI OŠETŘENÍ

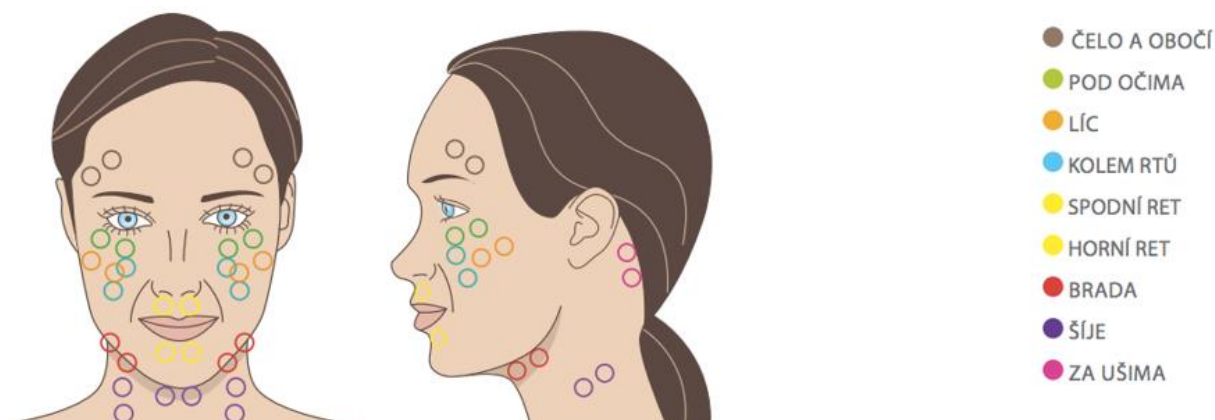

Při ošetřování doporučujeme používat zrcadlo.


	ČELO A OBOČÍ Umístěte jeden kontakt nad konec obočí, vycentrujte mezi obočí a linií vlasů. Nasměrujte přístroj tak, aby byl druhý kontakt uprostřed mezi obočím a vlasovou linií.
	POD OČIMA Použijte linii pod očima, na hraně kosti, umístěte jeden kontakt na tuto linii a přímo doprostřed pod oko. Další kontakt musí sledovat konturu směrem ven.
	LÍCE Umístěte kontakty pod a podél diagonální křivky lící kosti. Najděte nejvhodnější pozici podle tvaru obličeje, v případě silné kontrakce s jemnějším brněním.
	KOLEM RTŮ Tyto linie se nachází mezi nosem a rohem úst. Umístěte jeden kontakt na "jablko" líce a druhý kontakt diagonálně pod tento bod podle přirozené linie a paralelně s liniemi rtů. Upravte pozici, dokud neucítíte silnější kontrakce
	HORNÍ A SPODNÍ RET Umístěte kontakty symetricky nad okraj rtu. Zvyšte výkon pro dosažení dobré kontrakce. Opakujte tento postup pod spodním rtem. Pokud rty vypadají nerovnoměrné do jedné strany, to je přirozené.
	BRADA Kopírujte linii brady diagonálně dolů a umístěte kontakty na některou stranu čelisti. Zvyšte výkon pro dosažení nejlepších kontrakcí. Může být nutné mírně upravit pozici pohybem
	KRK A PODBRADEK Nejprve umístěte kontakty podél svalů zdvihačů hlavy přibližně v místech, kde tepe krev. Dále umístěte kontakty na sval pod bradou. Pro nejlepší umístění držte kontakty v linii, ale mírně je posuňte nahoru či dolů, dokud nenajdete silnější kontrakce.
	ZA UŠIMA Umístěte kontakty k vlasové linii co nejvýše bez kontaktu s ušima. Ucítíte skutečně silné kontrakce přes linii šíje.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

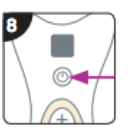
	KROK 1 Naneste dostatečné množství vodivého gelu na kuličkové kontakty. Dostatečné množství gelu je důležité pro správný kontakt s kůží.
	KROK 2 Stisknutím tlačítka Program / On / Off, po dobu 3 sekund se přístroj zapne. Jakmile se zapne, pípne a modrý LCD displej se rozsvítí. Přístroj začne na programu 1. Opakovaně stiskněte Program / On / Off tlačítko pro výběr požadovaného programu. Poznámka: Pokaždé, když je vybrán jiný program, bude intenzita na 1. úrovni.
	KROK 3 Na čistou kůži umístěte kuličkové kontakty pro ošetření první oblasti.
	KROK 4 Zvyšte výkon stisknutím tlačítka (+) a přesuňte pozici kontaktů, dokud neucítíte požadované kontrakce svalů. Pokud se necítíte dobře, snižte výkon tlačítkem (-). Poznámka: Na různých oblastech obličeje upravte požadovanou intenzitu.
	KROK 5 Držte přístroj v pozici 60 sekund pro dokončení ošetření oblasti. Po 60 sekundách přístroj pípne jako signalizace, že se můžete přesunout na další oblast. Snižte výkon před přemístěním na další oblast.
	KROK 6 Po použití přístroj vypněte. Stiskněte a podržte tlačítko /On/ Off na 3 sekundy.

POZNEJTE SVALOVÉ SKUPINY

Při používání obličeje se cvičí určité svaly. Toto je návod, který Vám pomůže určit, které svaly procvičujete a k čemu slouží.

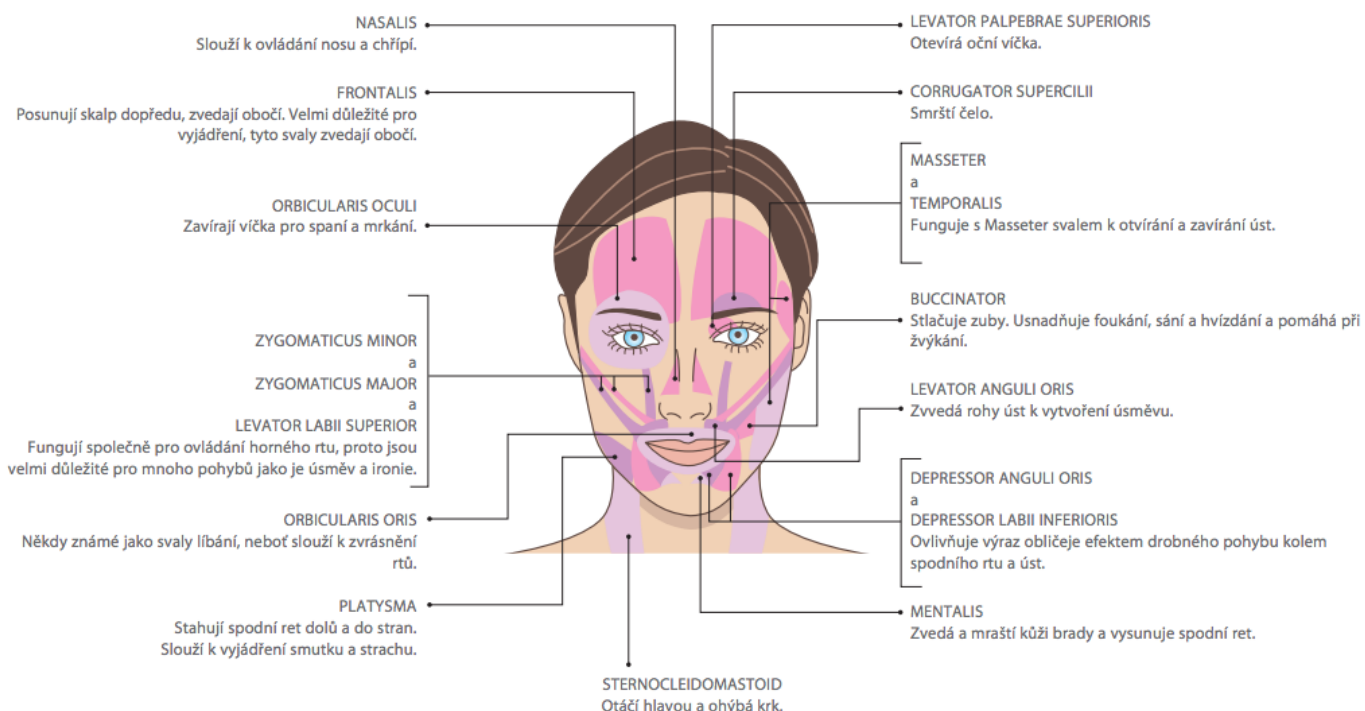

GALVANICKÁ IONTOFORÉZNÍ INFÚZE

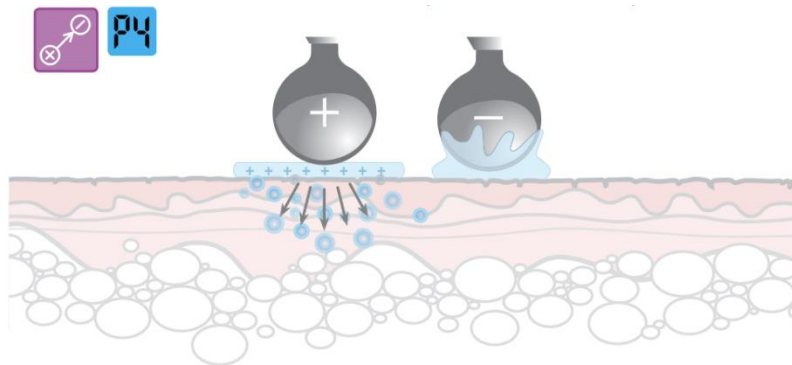

Iontoforézní infuze používá mikro proud pro proniknutí aktivních ingrediencí k ošetření hluboko do kůže. Tato transdermální infuze úžasně zvyšuje efektivitu místně aplikovaného přípravku, který v opačném případě obtížně prochází kůží.

Kolagenovo-retinolové gelové náplasti obsahují kladně nabitý kolagen a retinol jako činitel proti vráskám a věku. Při umístění kladného kontaktu na každou náplast a záporného kontaktu na kůži tyto aktivní ingredience jsou přímo "vtlačovány" do kůže.

Krátkodobé výsledky jsou viditelné většinou ihned. S pravidelným použitím se účinek prodlužuje.

Doporučujeme kolagenovo-retinolové náplasti používat jednou za 24 hodin. Pokud máte citlivou pokožku, ponechte přestávku 48 hodin mezi ošetřeními.

Náplasti jsou tvarované podle oblasti pod očima, na čelo, kolem úst a přes bradu.

Režim ošetření


Doporučujeme kolagenovo-retinolové náplasti používat pouze jednou za 24 hodin. Pokud máte citlivou pleť, doporučujeme vám pauzu 48 hodin před další aplikací náplastí. Program 4.

Co můžete pociťovat

Doporučujeme začít na nízké úrovni intenzity na každé zóně. Postupně zvyšujte intenzitu, až pociťíte nestabilní brnění.







ZÓNY OŠETŘENÍ

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ● ČELO | ● KOLEM RTŮ |
| ● ODSTRANĚNÍ VRÁSEK | ● BRADA |
| ● POD OČIMA | ● HORNÍ RET (proklad) |

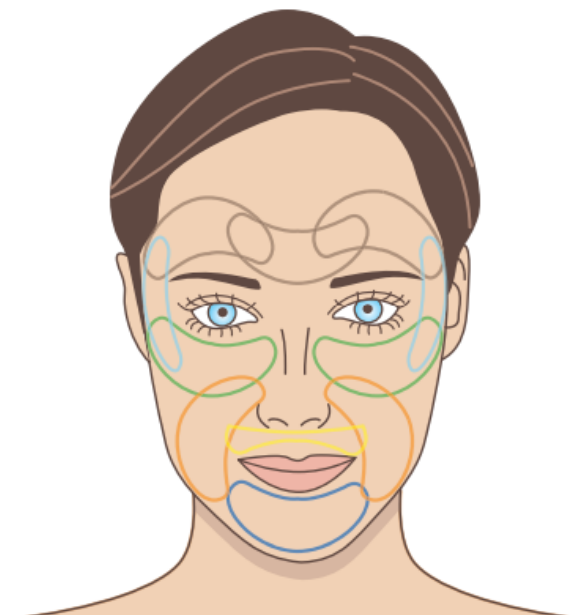

INFORMACE O NÁPLASTECH

- Základ infuze nastane v prvních 5–15 minutách ošetřované oblasti, ale náplasti mohou zůstat na obličeji 1 hodinu.
- Retinol se snadno znehodnotí, proto skladujte náplasti na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční záření. Můžete je skladovat v chladničce.
- Retinol může zvýšit citlivost vaší kůže na slunce. Nevystavujte pokožku po aplikaci slunečnímu či solárnímu záření. Po použití doporučujeme použít krém s ochranným faktorem.
- Zajistěte, aby se náplasti dobře přilepily na obličej.
- Při použití přístroje používejte jemný pohyb po kůži.
- Náplasti jsou určeny pro jedno použití.

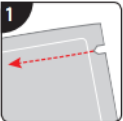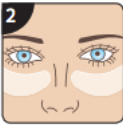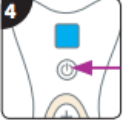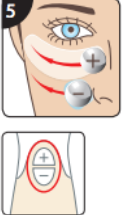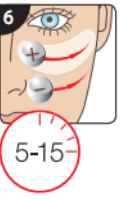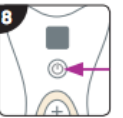	DŮLEŽITÉ Pro infuzi musíte dbát správné polarity kontaktů. Kontakt (+) musí zůstat na náplasti, zatímco kontakt (-) musí být na kůži.
	KROK 1 Důkladně vyčistěte a vysušte kůži. Neaplikujte zvlhčovače. Otevřete balíček s náplastí. Vyndejte náplast z obalu a odstraňte obal pro odkrytí kontaktu náplasti.
	KROK 2 Umístěte náplast na ošetřovanou oblast. Další náplast dejte na protilehlou stranu obličeje.
	KROK 3 Aplikujte dostatek gelu na kuličkový kontakt (-). Použijte dostatečné množství gelu pro zajištění dobrého kontaktu s pokožkou.
	KROK 4 Zvolte program 4 - Iontoforéza, stisknutím tlačítka Program/ On / Off čtyřikrát. Na LCD displeji se ukáže P4.
	KROK 5 S kontaktem (-) na kůži a kontaktem (+) na náplasti jemně pohybujte vpřed a vzad po dobu 60 sekund. Zvyšte výkon, pokud cítíte statické brnění.
	KROK 6 Opakujte proces na druhé náplasti. Pokračujte v ošetření mezi náplastmi po dobu 10–30 minut (5–15 minut na každé straně).
	KROK 7 Náplasti mohou zůstat na kůži 1 hodinu pro dokončení infuze. Po sejmutí náplastí můžete vmasírovat veškeré zbytky do kůže.
	KROK 8 Po použití přístroj vypněte. Stiskněte a podržte tlačítko Program/ On/ Off na 3 sekundy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Přístroj můžete čistit vlhkou utěrkou.
- NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla.
- NEPONOŘUJTE přístroj do vody.
- NEDEMONTUJTE. Uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. V případě nutnosti kontaktujte autorizované servisní středisko. Pokud je přístroj poškozený, nepoužívejte jej.
- NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti krátkovlnných nebo mikrovlnných přístrojů.
- Pokud si všimnete nestandardního provozu přístroje, mohl být vystavený externímu elektromagnetickému rušení, např. z motorů/ reproduktorů. Odstraňte tento zdroj rušení a restartujte přístroj.

LIKVIDÁCIA

Směrnice o likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů (WEEE), (2002/96/) platí pro recyklaci produktů nejlepším možným způsobem a nejlepšími technikami pro minimalizaci dopadu na životní prostředí, úsporu energie a přírodních zdrojů. Výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení, proto zajistěte na konci jeho životnosti správnou likvidaci v souladu s místními předpisy. NESMÍ se likvidovat společně s běžným domovním odpadem.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz



FALI6 – Návod na použitie SK

UPOZORNENIE

Prosím, pozorne si prečítajte všetky inštrukcie a ponechajte si ich pre budúce použitie.

- NEPOUŽÍVAJTE, ak ste tehotná alebo máte kardiostimulátor, epilepsiu, cukrovku, sklerózu multiplex, alebo ak sa zotavujete po operácii.
- Zvýšte pozornosť pri použití kontaktov v blízkosti očí. Dodržujte odstup kontaktov najmenej 1 cm od očí.
- NEPOUŽÍVAJTE na miestach postihnutých rosaceou, na zápalovom akné, odretej koži, citlivej koži ani na jazvách, materskom znamienku alebo kĺbových žilách.
- Ak sa gél dostane do kontaktu s očami, dôkladne ich opláchnite vodou. Ak sa objaví podráždenie, kontaktujte lekára.
- Držte mimo dosahu detí a zvierat.

VEDA

Ako starneme, naše tvárové svaly strácajú svoj tonus. Tváre padajú, objavuje sa druhá brada a pribúdajú vrásky. Lift Plus kombinuje dve technológie kozmetických salónov pre lifting, rejuvénáciu a omladenie pleti.




Faradický prúd - EMS (elektricko-svalová stimulácia) spevňuje poklesnuté rysy tváre a celkovo omladzuje pokožku. S použitím trochy vodivého gélu face lift urobí všetku ťažkú prácu za vás. Program 1 – 3.



Galvanická infúzia (Iontoforéza) - používa jemný mikro prúd pre transport účinných látok hlboko do kože. S pomocou kolagén-retinolových náplastí pomáha redukovať vrásky a zlepšuje elasticitu pokožky. Program 4.

ZOZNÁMTE SA LCD DISPLEJ

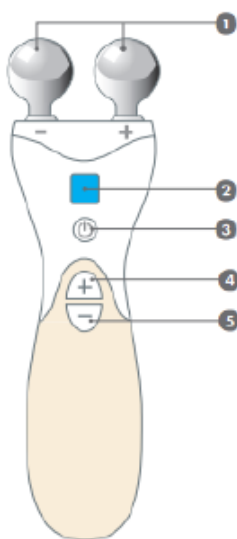

Programy sú znázornené písmenom „P“ a číslom.



Intenzita je znázornená iba číslom.

Krátkym stiskom (+) alebo (-) tlačidla zmeníte intenzitu. Stálym podržaním tlačidla (+) alebo (-) sa rýchlo posuniete cez úrovne intenzity.

Modrý LCD displej zostane svietiť po dobu 5 sekúnd a potom sa vypne, pokiaľ nie je stlačené žiadne tlačidlo.

Auto vypnutie: po 30 minútach bez stlačení akéhokoľvek tlačidla prístroj pípne a vypne sa.


60 sekundový časovač: Jednotka pípnutím každých 60 sekúnd naznačuje možnosť presunu na iné miesto.

1 - Gulôčkové kontakty (-) a (+)
4 - Tlačidlo zvýšenia výkonu (+)


2 - LCD displej
5 - Tlačidlo zníženia výkonu (-)

3 - Tlačidlo Program On/Off
6 - Priestor pre batérie

BATÉRIA

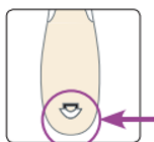

K vložení batérie uvoľníte sponu a otvorte kryt. Pripojte PP3 9V alkalickú batériu a uistite sa, že kontakt **+** je pripojený podľa obrázka. Vložte uvoľňovací pásik pod batériu a nasadte kryt na miesto.

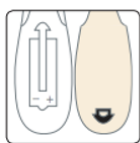

- Keď nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, batériu vyberte.
- **NEPOUŽÍVAJTE** nabíjacie batérie.
- Zaoistite správnu likvidáciu starých batérií v súlade s miestnymi predpismi.


TEST ZNÁŠANLIVOSTI

Dôležité: Vždy vykonajte test vodivosti s vodivým gélom na menej viditeľnom mieste kože pre možné reakcie. Počkajte 24 hodín. Ak sa objaví podráždenie pokožky, prístroj nepoužívajte. Ak sa objavia kožné reakcie po použití kolagénu a retinolu, ošetrovanie prístrojom nerobte.

PROGRAMY & OŠETRENIE

Program	Ošetrovanie	Technológia	Intenzita	Gél/Náplasti
P1	Spevnenie Rytmické 2 sekundové stiahnutie svalov pre získanie kondície a krátke 3 sekundové pauzy medzi jednotlivými impulzmi.	 EMS	1- 20	Vodivý gél
P2	Dôkladné spevnenie Ponúka maximálne precvičenie svalov vďaka prednastavenej variácii rôznej intenzity sťahovania.	 EMS	1 - 20	Vodivý gél
P3	Poklepávanie Masážne stimulácie svalov. Striedanie 5 sekundovej masážnej akcie s 3 sekundovou relaxáciou.	 EMS	1- 20	Vodivý gél
P4	Iontoforézna infúzia Využíva slabý mikroprúd k zapracovaní účinných látok hlboko do pokožky	 Iontoforéza	1- 10	Kolagenovo-retinolové náplasti a vodivý gél

FARADICKÁ TVÁROVÁ GYMNASTIKA

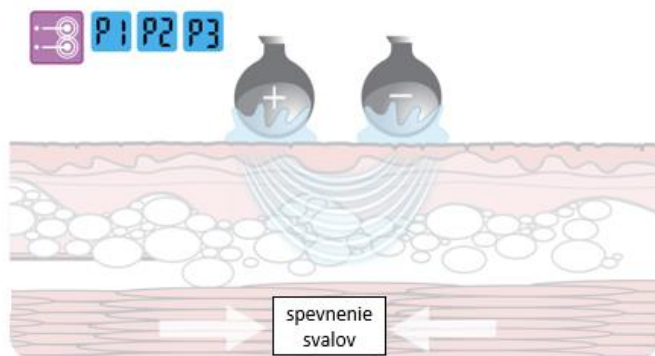

Už viac ako 40 rokov sa v salónoch krásy využíva faradická tonizácia s EMS (Elektrická stimulácia svalov) pre jemné sťahovanie a uvoľňovanie tvárových svalov pre lifting a spevnenie pleti. Táto stimulácia tiež zvyšuje cirkuláciu, čo prináša viac kyslíka do kožných buniek a rýchlejšie odstraňuje toxíny, zanecháva pokožku sviežu a omladenú. Takisto vykonáva lymfatickú drenáž.


Režim ošetrovania

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame faradické ošetrovanie vykonávať každý deň po dobu prvých niekoľkých týždňov, striedavo programy 1, 2 a 3 každý deň. Potom používajte podľa potreby pre udržanie spevnených svalov.

Čo budete pociťovať

- Spočiatku ucítite jemné vibrácie, s pridaním intenzity sa sval začne sťahovať.
- Vaše zuby môžu byť citlivé v priebehu ošetrovania, to je úplne normálne.
- Efektívne ošetrovanie tváre je založené na príjemnej stimulácii svalov. Ak máte nepríjemný pocit, pridajte vodivý gél alebo znížte intenzitu, prípadne sa presuňte na inú oblasť.
- Pred presunutím na inú oblasť znížte intenzitu.



OBLASTI OŠETRENIA

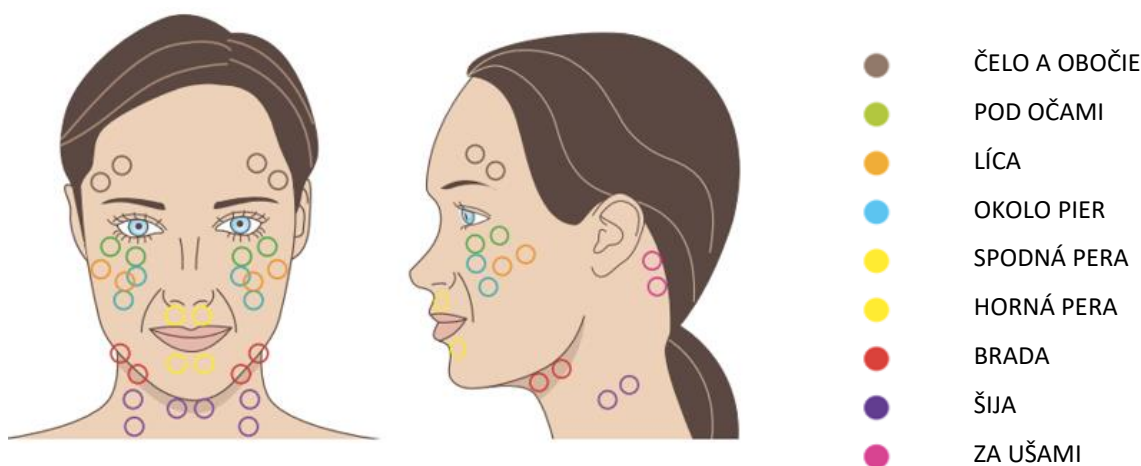

Pri ošetrovaní odporúčame používať zrkadlo.


	ČELO A OBOČIE Umiestnite jeden kontakt na koniec obočia, vycentrujte medzi obočie a líniu vlasov. Nasmerujte prístroj tak, aby bol druhý kontakt uprostred medzi obočím a vlasovou líniou.
	POD OČAMI Použite líniu pod očami, na hrane kosti, umiestnite jeden kontakt na túto líniu a priamo doprostred pod oko. Ďalší kontakt musí sledovať kontúru smerom von.
	LÍCA Umiestnite kontakty pod a pozdĺž diagonálnej krivky lícnej kosti. Nájdite najvhodnejšiu pozíciu podľa tvaru tváre, v prípade silnej kontrakcie s jemnejším brnením.
	OKOLO PIER Tieto línie sa nachádzajú medzi nosom a rohom úst. Umiestnite jeden kontakt na "jablko" líca a druhý kontakt diagonálne pod tento bod podľa prirodzenej línie a paralelne s líniami pier. Upravte pozíciu, kým nepocítite silnejšie kontrakcie
	HORNÁ A SPODNÁ PERA Umiestnite kontakty symetricky nad okraj pery. Zvýšte výkon pre dosiahnutie dobrej kontrakcie. Opakujte tento postup pod spodnou perou. Ak pery vyzerajú nerovnomerné do jednej strany, to je prirodzené.
	BRADA Kopírujte líniu brady diagonálne nadol a umiestnite kontakty na niektorú stranu čeľuste. Zvýšte výkon pre dosiahnutie najlepších kontrakcií. Môže byť nutné mierne upraviť pozíciu pohybom
	KRK A PODBRADOK Najprv umiestnite kontakty pozdĺž svalov zdvíhačov hlavy približne v miestach, kde tepe krv. Ďalej umiestnite kontakty na sval pod bradou. Pre najlepšie umiestnenie držte kontakty v línii, ale mierne ich posuňte nahor alebo nadol, kým nenájdete silnejšie kontrakcie.
	ZA UŠAMI Umiestnite kontakty k vlasovej línii čo najviac bez kontaktu s ušami. Ucítite skutočne silné kontrakcie cez líniu šíje.

POUŽITIE PRÍSTROJA

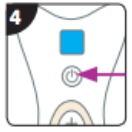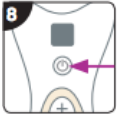
	KROK 1 Naneste dostatočné množstvo vodivého gélu na guľôčkové kontakty. Dostatočné množstvo gélu je dôležité pre správny kontakt s kožou.
	KROK 2 Stlačením tlačidla Program / On / Off, po dobu 3 sekúnd sa prístroj zapne. Akonáhle sa zapne, pípne a modrý LCD displej sa rozsvieti. Prístroj začne na programe 1. Opakovane stlačte Program / On / Off tlačidlo pre výber požadovaného programu. Poznámka: Zakaždým, keď je vybraný iný program, bude intenzita na 1. úrovni.
	KROK 3 Na čistú kožu umiestnite guľôčkové kontakty pre ošetrovanie prvej oblasti.
	KROK 4 Zvýšte výkon stlačením tlačidla (+) a presuňte pozíciu kontaktov, kým nepocítite požadované kontrakcie svalov. Ak sa necítite dobre, znížte výkon tlačidlom (-). Poznámka: Na rôznych oblastiach tváre upravte požadovanú intenzitu.
	KROK 5 Držte prístroj v pozícii 60 sekúnd pre dokončenie ošetrovania oblasti. Po 60 sekundách prístroj pípne ako signalizácia, že sa môžete presunúť na ďalšiu oblasť. Znížte výkon pred premiestnením na ďalšiu oblasť.
	KROK 6 Po použití prístroj vypnite. Stlačte a podržte tlačidlo /On/ Off na 3 sekundy.

POZNAJTE SVALOVÉ SKUPINY

Pri používaní tváre sa cvičia niektoré svaly. Toto je návod, ktorý Vám pomôže určiť, ktoré svaly precvičujete a na čo slúžia.

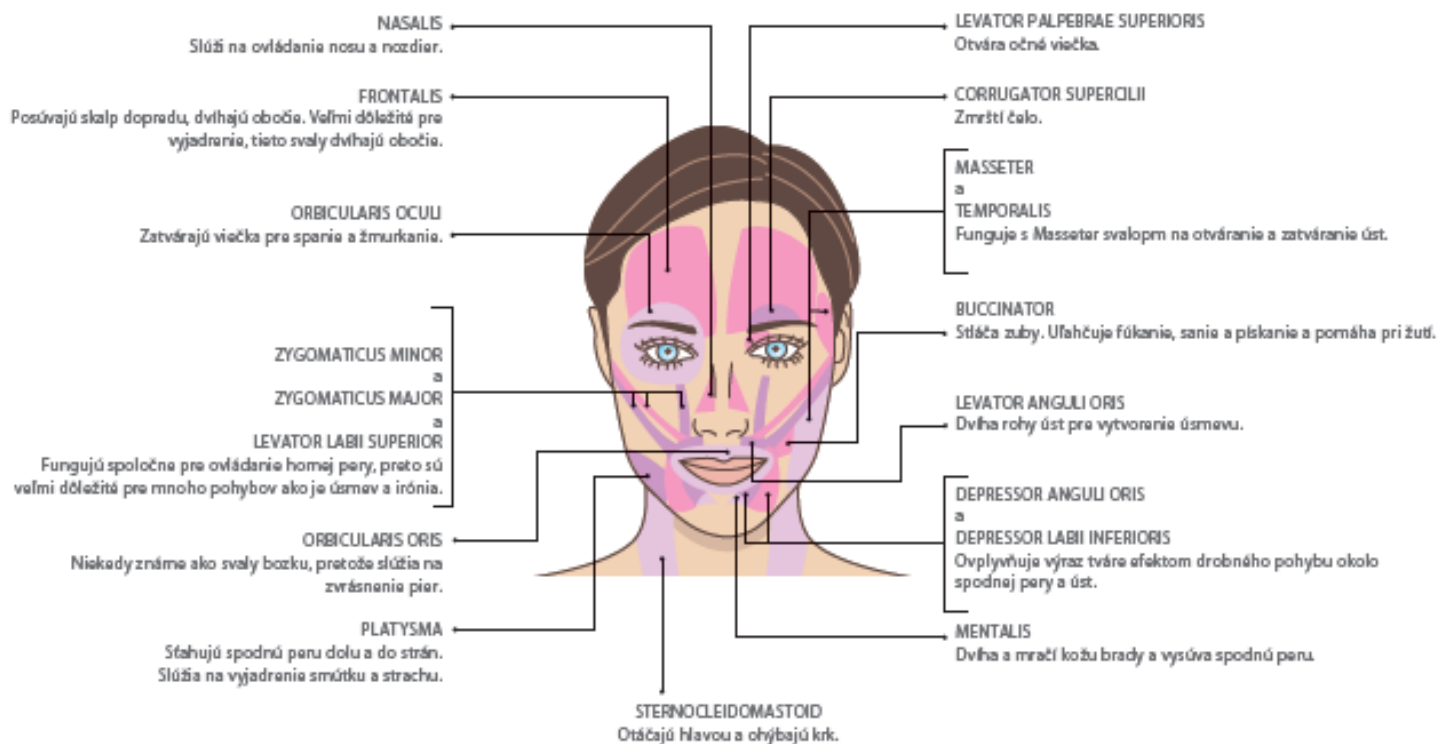

GALVANICKÁ IONTOFORÉZNA INFÚZIA

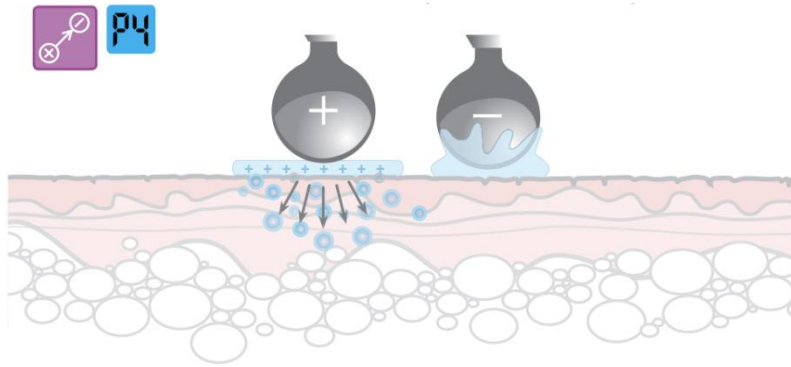

Iontoforézna infúzia používa mikroprúdy pre preniknutie aktívnych ingrediencií na ošetrovanie hlboko do kože. Táto transdermálna infúzia úžasne zvyšuje efektivitu lokálne aplikovaného prípravku, ktorý v opačnom prípade ťažko prechádza kožou.

Kolagénovo-retinolové gélové náplasti obsahujú kladne nabitý kolagén a retinol ako činiteľ proti vráskam a veku. Pri umiestnení kladného kontaktu na každú náplasť a záporného kontaktu na koži tieto aktívne ingrediencie sú priamo "vtláčané" do kože.

Krátkodobé výsledky sú viditeľné väčšinou ihneď. S pravidelným použitím sa účinok predlžuje.

Odporúčame kolagénovo-retinolové náplasti používať raz za 24 hodín. Ak máte citlivú pokožku, ponechajte prestávku 48 hodín medzi ošetrovaním.

Náplasti sú tvarované podľa oblasti pod očami, na čelo, okolo úst a cez bradu.

Režim ošetrovania

Odporúčame kolagénovo-retinolové náplasti používať iba raz za 24 hodín. Ak máte citlivú pleť vám odporúčame pauzu 48 hodín pred ďalšou aplikáciou náplastí. Program 4

Čo môžete pociťovať

Odporúčame začať na nízkej úrovni intenzity na každej zóne. Postupne zvyšujte intenzitu, až pociťte nestabilné brnenie.







ZÓNY OŠETRENIA

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ● ČELO | ● OKOLO PIER |
| ● ODSTRÁNENIE VRÁSKOK | ● BRADA |
| ● POD OČAMI | ● HORNÁ PERA (preklad) |



INFORMÁCIE O NÁPLASTÁCH

- Základ infúzie nastane v prvých 5-15 minútach ošetrovanej oblasti, ale náplasti môžu zostať na tvári 1 hodinu.
- Retinol sa ľahko znehodnotí, preto skladujte náplasti na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. Môžete ich skladovať v chladničke.
- Retinol môže zvýšiť citlivosť vašej kože na slnko. Nevystavujte pokožku po aplikácii slnečnému alebo solárnemu žiareniu. Po použití odporúčame použiť krém s ochranným faktorom.
- Zabezpečte, aby sa náplasti dobre prilepili na tvár.
- Pri použití prístroja používajte jemný pohyb po koži.
- Náplasti sú určené pre jedno použitie.

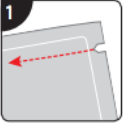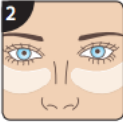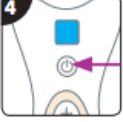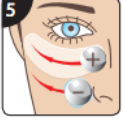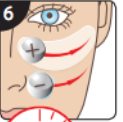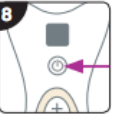	DÔLEŽITÉ: Pre infúziu musíte dbať správnej polarítu kontaktov. Kontakt (+) musí zostať na náplasti, zatiaľ čo kontakt (-) musí byť na koži.
	KROK 1 Dôkladne vyčistite a vysušte kožu. Neaplikujte zvlhčovače. Otvorte balíček s náplastou. Vyberte náplast z obalu a odstráňte obal pre odkrytie kontaktu náplasti.
	KROK 2 Umiestnite náplast na ošetrovanú oblasť. Ďalšiu náplast dajte na protiľahlú stranu tváre.
	KROK 3 Aplikujte dostatok gélu na guľôčkový kontakt (-). Použite dostatočné množstvo gélu pre zabezpečenie dobrého kontaktu s pokožkou.
	KROK 4 Zvoľte program 4 - Iontoforéza, stlačením tlačidla Program / On / Off štyrikrát. Na LCD displeji sa ukáže P4.
 	KROK 5 S kontaktom (-) na kožu a kontaktom (+) na náplasti jemne pohybujte vpred a vzad po dobu 60 sekúnd. Zvýšte výkon, ak cítite statické brnenie.
 	KROK 6 Opakujte proces na druhej náplasti. Pokračujte v ošetrovaní medzi náplastami po dobu 10-30 minút (5-15 minút na každej strane).
	KROK 7 Náplasti môžu zostať na koži 1 hodinu pre dokončenie infúzie. Po sňatí náplastí môžete vmasírovať všetky zvyšky do kože.
	KROK 8 Po použití prístroj vypnite. Stlačte a podržte tlačidlo Program / On / Off na 3 sekundy.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- Prístroj môžete čistiť vlhkou utierkou.
- NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá.
- NEPONÁRAJTE prístroj do vody.
- NEDEMONTUJTE. Vnútri sa nenachádzajú vami opraviteľné časti. V prípade nutnosti kontaktujte autorizované servisné stredisko. Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.
- NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti krátkovlnných alebo mikrovlnných prístrojov.
- Ak si všimnete neštandardnej prevádzky prístroja, mohol byť vystavený externému elektromagnetickému rušeniu, napr. z motorov / reproduktorov. Odstráňte tento zdroj rušenia a reštartujte prístroj.

LIKVIDÁCIA

Smernica o likvidácii starých elektrických a elektronických prístrojov (WEEE) (2002/96 /) platí pre recykláciu produktov najlepším možným spôsobom a najlepšími technikami pre minimalizáciu dopadu na životné prostredie, úsporu energie a prírodných zdrojov. Výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie, preto zaistíte na konci jeho životnosti správnu likvidáciu v súlade s miestnymi predpismi. Prístroj sa NESMIE likvidovať spoločne s domovým odpadom.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz