



FACE **GLO**

1072



the beauty specialists

RIO-FCLT3-PCPS

Česky

LED maska na obličej

Světelná terapie na obličej FaceGLO 1072



VAROVÁNÍ

- Přečtěte si pečlivě všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili související nebezpečí.
- Tento spotřebič lze používat pouze s dodaným síťovým adaptérem SK01T-0500100Z. Odnímatelný zdroj IEC 60417-6181.
- Pokud je napájecí kabel nebo AC/DC adaptér poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. Kontaktujte zákaznickou podporu a domluvte si výměnu.
- Neponořujte výrobek do vody. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- NEPOUŽÍVEJTE tento produkt, pokud nefunguje správně, nebo pokud upadl nebo byl poškozen.
- NEPOUŽÍVEJTE FaceGLO, pokud užíváte léky, které mohou způsobovat fotosenzitivitu. Pokud používáte FaceGLO a užíváte léky, které mohou způsobit fotosenzitivitu, můžete si způsobit vážnou kožní reakci.
- Fotosenzitivita je častým vedlejším účinkem různých léků. Ty mohou zahrnovat některá antibiotika, chemoterapeutika a diuretika. Pokud si nejste jisti některými léky, které možná užíváte, poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče.
- NEPOUŽÍVEJTE FaceGLO k léčbě jiných stavů kromě těch, které jsou uvedeny v indikacích k použití.
- NEPOUŽÍVEJTE FaceGLO, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte. FaceGLO NEBYL testován na těhotných nebo kojících ženách, a proto je riziko pro plod, novorozence nebo těhotné ženy není známé.
- NEPOUŽÍVEJTE systém faceLite LED, pokud trpíte lupus erythematoses, fotosenzitivním ekzémem nebo albinismem. Pokud používáte systém faceLite LED k ošetření lupus erythematoses, fotosenzitivního ekzému nebo albinismu, můžete si způsobit závažnou kožní reakci.
- NEPOUŽÍVEJTE FaceGLO, pokud trpíte nějakou fotosenzitivní poruchou (senzibilizací na světlo).
- Před použitím FaceGLO musíte provést test senzibilizace.
- NEPOUŽÍVEJTE FaceGLO žádným způsobem, který není přesně uveden v tomto návodu k použití.
- Okamžitě VYPNĚTE a sundejte FaceGLO, pokud je horký nebo vaše pokožka vykazuje známky přehřátí.
- Používejte FaceGLO pouze s hydrogelovými maskami, doporučenými nebo dodávanými pro použití s FaceGLO. Jiné masky jsou k dispozici, ale nebyly testovány se systémem FaceGLO.
- NEPOUŽÍVEJTE FaceGLO bez předchozího odstranění krémů, nebo make-upu. Některé složky v těchto produktech mohou způsobit citlivost na světlo nebo mohou snížit účinek ošetření.

- NIKDY nepoužívejte FaceGLO v blízkosti vody nebo tam, kde by se na výrobek mohla vyliť voda. NEPOUŽÍVEJTE FaceGLO, pokud si myslíte, že přišel do kontaktu s vodou.
- Udržujte FaceGLO mimo HORKÉ povrchy.
- NEPOKOUŠEJTE se žádným způsobem opravovat FaceGLO. Oprava FaceGLO zruší vaši záruku. FaceGLO neobsahuje žádné vyměnitelné/opravitelné díly.
- NEPOUŽÍVEJTE FaceGLO, pokud jsou maska, ovladač nebo nabíjecí kabel jakkoli poškozené.
- Popruhy FaceGLO obsahují směs polyesteru, nylonu a lycry. Pokud jste alergičtí na některý z těchto materiálů, je možné že nebudete moci používat dodaný popruh na hlavu.
- NEPOUŽÍVEJTE LED masku FaceGLO, pokud trpíte bolestmi hlavy způsobenými světlem.
- Nezasunujte přední zástrčku do zásuvky bez připojeného adaptéru.
- NESDÍLEJTE FaceGLO s žádnou jinou osobou. FaceGLO je určen pouze pro jednoho uživatele.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení častěji než je doporučeno.

Fotosenzitivita je běžným vedlejším účinkem různých léků. Mezi ně patří určitá antibiotika, chemoterapeutika a diuretika. Pokud si nejste jisti nějakým lékem, možná se obrátíte na svého lékaře.

I jiné látky, které nejsou výše uvedeny, mohou způsobovat fotosenzitivitu. Běžné příklady těchto látek jsou:

Třezalka tečkovaná, dehet, deodoranty, antibakteriální mýdla, umělá sladidla, naftalen (naftalín), ropné produkty, zesvětľující látky obsažené v pracích prostředcích a síran kadmia (chemikálie vstřikovaná do kůže při tetování).

ÚVOD

FaceGlo je vhodný pro dospělé, kteří chtějí zmírnit tvorbu hlubokých vrásek na obličeji.

S přibývajícím věkem se pokožka stává tenčí a sušší, může se objevit ochabnutí a dochází k tvorbě vrásek, kvůli úbytku kolagenu a snížené elasticitě tkání. Stárnoucí pokožka je také náchylnější ke vzniku hnědých skvrn a pigmentací. Dermis pokožky může během stárnutí ztratit 20 % až 80 % své tloušťky.

FaceGLO využívá klinicky ověřené vlnové délky v červené a blízké infračervené oblasti světelného spektra (600 nm až 1100 nm). V klinických studiích bylo prokázáno, že tyto vlnové délky stimulují buňky produkující kolagen a elastin, prostřednictvím procesu zvaného fotobiomodulace.

FaceGLO byla navržena tak, aby dodávala světlo přímo do pokožky, čímž zajistí, že maximální množství světla zasáhne její buněčné cíle.

FaceGLO je volně prodejné domácí zařízení pro dospělé, určené k vysílání energie z červené a blízké infračervené oblasti světelného spektra na eliminaci hlubokých vrásek na obličeji.

O VÝROBKU

❶ Řemínek na hlavu
- háček

❷ Řemínek na hlavu
- smyčka

❸ Obličejová maska

❹ Krytky očí

❺ Adaptér s
konektory

❻ Skladovací
pouzdro

❼ USB-C
zásuvka

❽ Ovládací prvek

❾ Zapnuto/vypnuto

❿ LED kontrolky

⓫ USB zásuvka

+ Photology světelná maska

TEST CITLIVOSTI

Před prvním ošetřením musíte provést test citlivosti.

1. Vyčistěte pokožku na vnitřní straně předloktí, abyste odstranili veškeré kosmetické přípravky, jako jsou opalovací krémy.
2. Umístěte FaceGLO na vnitřní stranu předloktí, LED diodami směrem ke kůži.
3. Zapněte ovladač a nastavte FaceGLO na 10minutový ošetřující program.
4. Pokud vás bude maska na pokožce pálit, nebo bude ošetření nepříjemné, ihned program ukončete a přístroj vypněte.
5. Po léčbě počkejte alespoň 6 hodin. Pokud zůstane kůže na vnitřní straně vašeho předloktí červená nebo podrážděná, pak pro vás FaceGLO není vhodný.

KRYTKY NA OČI

Zatímco světlo použité ve vašem FaceGLO je zcela bezpečné, může vám připadat příliš jasné. Pokud se vám zdá, že potřebujete, aby LED světlo bylo méně jasné, můžete použít ochranné oční krytky pro vyšší úroveň pohodlí. Oční ochranné krytky se snadno nasazují přímo do očních otvorů.



Oční ochranné krytky splňují všechny příslušné normy bezpečnosti očí (IEC 62471:2006).

NABÍJENÍ


Pro nabíjení FaceGLO vložte napájecí adaptér do USB-C zásuvky ovladače. Zapojte AC/DC adaptér do síťového zdroje a zapněte jej. Tři LED diody na řídicí jednotce začnou blikat, což signalizuje nabíjení. Po úplném nabití se rozsvítí všechny tři LED diody.

Poznámka: Vždy zařízení plně dobijte, dokud poslední LED dioda přestane blikat. FaceGLO nebude fungovat při nabíjení.

ZAČÍNÁME

Před každým použitím, při vypnutém zařízení, očistěte masku FaceGLO. Viz pokyny k čištění. FaceGLO je dodávána s nastavitelnými popruhy, které vám umožňují pohodlné nošení masky.

Pro nasazení masky provlékněte popruh otvory po obou stranách masky a spojte je pomocí háčků a smyček.

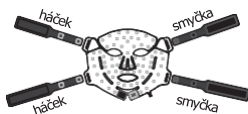

Omotejte popruhy kolem hlavy a pevně je upevněte pomocí háčků a smyček.

Upravte čelo a bradu, aby byla maska těsně usazena. Pro nejlepší výsledky dbejte na to, aby byla maska nasazena co nejbližší čelu a bradě.



OŠETŘENÍ

Pro dosažení nejlepších výsledků ošetřujte pokožku 3–5 dní v týdnu, minimálně 6 týdnů. Udržovací ošetření by mělo být prováděno podle potřeby, v závislosti na životním stylu a stavu pokožky.

Ošetření FaceGLO:

1. Pleť vyčistěte, abyste odstranili všechny kosmetické přípravky.
2. Umístěte zařízení FaceGLO na obličej, upravte bradu a čelo masky, tak aby seděla a upevněte popruhy kolem hlavy.
3. Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout pro zapnutí. Zařízení se automaticky vypne po deseti minutách. Ošetření můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout.
4. Na konci ošetření si sundejte masku.
5. Naneste svůj běžný hydratační krém nebo opalovací krém.

Poznámka:

Bezprostředně po ošetření může pokožka zrdnout.

Měla by se vrátit do normálu během 1–2 hodin.

Po ošetření:

- Někteří uživatelé hlásili olupování kůže, související svědění a suchost. Jedná se o dočasný jev, který během pár dní zmizí. Dočasné bolesti hlavy se mohou objevit ihned po ošetření. Ačkoli toto zařízení vyzařuje úroveň viditelného a blízkého infračerveného světla, které jsou považovány za bezpečné pro pokožku. Pokud po použití zařízení zaregistrujete nežádoucí reakci, měli byste zařízení okamžitě přestat používat, který během pár dní zmizí. Dočasné bolesti hlavy se mohou objevit ihned po ošetření. Ačkoli toto zařízení vyzařuje úroveň viditelného a blízkého infračerveného světla, které jsou považovány za bezpečné pro pokožku. Pokud po použití zařízení zaregistrujete nežádoucí reakci, měli byste zařízení okamžitě přestat používat.

Součástí balení je světelná maska Photology Chlorophyll.

Tato maska optimalizuje vaši terapii červeným světlem Face Glo zesílením a odražením světla zpět do pokožky. Obsahuje chlorofyl α - β , rostlinné kmenové buňky a světelně fluoreskující sinice. Po aplikaci přeměňuje červené světlo produkující kolagen zpět do pokožky, čímž optimalizuje účinky červeného světla a dlouhodobé výsledky v boji proti stárnutí.

Jak to funguje?

Během terapie červeným světlem LED může pokožka odrážet vysoké procento světla. Světelná maska Chlorophyll toto odražené červené světlo absorbuje a vrací ho zpět do pokožky jako blízké červené a vzdálené červené světlo, čímž dramaticky zlepšuje účinnost ošetření.

Nepoužívejte, pokud máte zjištěnou alergii nebo přecitlivělost na kteroukoli složku.

Zabraňte kontaktu s očima.

V případě zasažení očí důkladně vypláchněte teplou vodou.

Nepoužívejte na poškozenou pokožku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepožívejte. Pouze k zevnímu použití.


Návod k použití:

Před otevřením balení produktu vždy proveďte test na malé ploše pleti (testovací sáček).

Používejte během ošetření červeným světlem LED.

1. Vyčistěte pleť.
2. Naneste tenkou vrstvu masky na obličej a/nebo krk.
3. Nechte vsáknout a aplikujte červené světlo.
4. Masku jemně smyjte z obličeje a osušte ji čistým a suchým ručníkem.

*Kompatibilní s jakýmkoli zařízením pro terapii červeným světlem. Používejte dle pokynů výrobce. Během LED terapie může pokožka odrážet až 60 % světla, zejména u panelových světel. K maximálnímu využití světla potřebného k tvorbě kolagenu, slouží směs chlorofylu α - β , rostlinných kmenových buněk a fluoreskujících sinic (modrozelených řas), která světlo absorbuje a dodává pokožce. Cenné světlo se tak neztratí, ale maximálně využije.

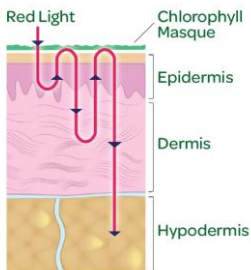

ČIŠTĚNÍ

Před každým použitím, při vypnutém zařízení, očistěte obličejovou masku podle níže uvedených pokynů pro čištění.

1. Ujistěte se, že zařízení při čištění NENÍ nabíjeno.
2. Očistěte obličejovou masku vlhkým čistým hadříkem. Odolné skvrny lze odstranit jemným otřením 70% alkoholem. NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné čisticí prostředky, protože by mohly poškodit plasty.
3. Ovladač vyčistěte vlhkým čistým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

FaceGLO skladujte při pokojové teplotě v suchu. Použijte přiloženou tašku. Vyhněte se skladování FaceGLO v prашném prostředí, na přímém slunci nebo ve vlhkých a mokrých podmínkách.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Žádné červené ani infračervené světlo z FaceGLO	Maska není nabitá	Zapojte ovladač do napájecího adaptéru a masku nabijte. Dokud na ovladači nezůstanou 3 svítící kontrolky, které NEBLIKAJÍ.
Žádné červené ani infračervené světlo z FaceGLO.	Zařízení je připojené k síti.	Odpojte USB-C konektor od ovladače.
LED diody se NEVYPNOU po 10 minutách.	Zařízení je vadné.	Vraťte masku prodejci.
LED diody během ošetření blikají.	Zařízení je vadné.	Vraťte masku prodejci.



LIKVIDACE

Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19/ EU) byla zavedena za účelem recyklace produktů s využitím nejlepších dostupných technik obnovy a recyklace, minimalizace dopadu na životní prostředí, zpracování nebezpečných látek a předcházení rostoucímu počtu skládek. Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto prosím zajistěte, aby byl na konci životnosti zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. Nesmí být vyhazován s domácím odpadem.

Recyklujte zodpovědně:

Zkontrolujte místní městské pokyny.

Oddělte komponenty a správně je zlikvidujte.

SPECIFIKACE

Vstup ovladače: 5V 800mA

Vstup do masky: 5V 450mA (CC)



Tento produkt je v souladu s platnou legislativou EU o výrobcích.



Před použitím si tyto pokyny pečlivě přečtěte a pak si je uchovejte pro budoucí použití.



Tento produkt je určen pouze pro



použití ve vnitřních prostorách.



Tento symbol znamená, že zařízení je chráněno před přímým slunečním světlem.



Stejnoseměrný proud



Odnímatelný zdroj IEC 60417-6181



Tento symbol označuje USB konektor.



Tento symbol znamená, že zařízení používá lithium-iontovou polymerovou baterii.



Symbol třídy III (IEC 60417-5180)



Isolace třídy II



Tato jednotka splňuje aktuální legislativu UKCA týkající se produktů.



Recyklační papír

Modelové číslo: FCLT3-PCPS

Čas programu: 10 minut ±
11 sekund

Vlnové délky:

- 630nm ± 10nm
- 830nm ± 10nm
- 1072 nm ± 20 nm

Maximální intenzita výstupu:

30mW/cm²

Provozní teplota:

0°C až 30°C (32°F až 86°F)

Teplota skladování a transportu:

-5°C až 55°C (23°F až 131°F)

Provozní vlhkost:

30 % až 95 % bez kondenzace

Skladování a přeprava vlhkosti:

20 % až 85 % bez kondenzace

Elektrický vstup z adaptéru: 100-240Vac, 50/60Hz. 0,25A

Elektrický výstup: 5V, 1A IP22

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na: online@riobeauty.com

Pro opětovné objednání doplňků navštivte prosím stránku
www.riobeauty.com nebo kontaktujte svého místního distributora.

KONTAKT NA REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

Zápy 4 (areál RTK), 250 01 Zápy, Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz

RIO-FCLT3-PCPS

Slovensky

LED maska na tvár

FaceGLO 1072 Tvárová svetelná terapia



VAROVANIE

- Všetky pokyny si dôkladne prečítajte a uchovajte si ich pre budúcnosť.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.
- Tento spotrebič je možné používať iba s dodaným AC adaptérom SK01T-0500100Z. Odnímateľný zdroj napájania IEC 60417-6181.
- Ak je napájací kábel alebo AC/DC adaptér poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Kontaktujte zákaznícku podporu a dohodnite si výmenu.
- Neponorte produkt do vody. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- NEPOUŽÍVAJTE tento produkt, ak nefunguje správne, alebo ak vám spadol alebo bol poškodený.
- NEPOUŽÍVAJTE FaceGLO, ak užívate lieky, ktoré môžu spôsobovať fotosenzitivitu. Ak používate FaceGLO a užívate lieky, ktoré môžu spôsobiť fotosenzitivitu, môžete spôsobiť vážnu kožnú reakciu.
- Fotosenzitivita je bežným vedľajším účinkom rôznych liekov. Medzi tieto lieky patria antibiotiká, chemoterapeutika a diuretiká. Ak si nie ste istí niektorými liekmi, ktoré užívate, poraďte sa so svojím lekárom.
- NEPOUŽÍVAJTE FaceGLO na liečbu iných stavov, než sú uvedené v indikáciách na použitie.
- NEPOUŽÍVAJTE FaceGLO, ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo dojčíte. FaceGLO NEBOL testovaný na tehotných alebo dojčiacich ženách, a preto riziko pre plod, novorodenca alebo tehotné ženy nie je známe.
- NEPOUŽÍVAJTE LED systém faceLite, ak trpíte lupus erythematosus, fotosenzitívnym ekzémom alebo albinizmom. Ak používate LED systém faceLite na liečbu lupus erythematosus, fotosenzitívneho ekzému alebo albinizmu, môžete spôsobiť vážnu kožnú reakciu.
- NEPOUŽÍVAJTE FaceGLO, ak trpíte poruchou fotosenzitívnosti (citlivosť na svetlo).
- Pred použitím FaceGLO je potrebné vykonať test senzibilizačnosti.
- NEPOUŽÍVAJTE FaceGLO spôsobom, ktorý nie je výslovne uvedený v tomto návode.
- Okamžite vypnite a dajte dole FaceGLO, ak je teplo alebo sa na vašej pokožke prejavujú známky prehriatia.
- Používajte FaceGLO iba s hydrogélovými maskami, odporúčanými alebo dodávanými na použitie s FaceGLO. Dostupné sú aj iné rúška, ale neboli testované s FaceGLO.
- NEPOUŽÍVAJTE FaceGLO bez predchádzajúceho odstránenia krémov alebo make-upu. Niektoré zložky v týchto produktoch môžu spôsobiť citlivosť na svetlo alebo znížiť účinok liečby.

- NIKDY nepoužívajte FaceGLO blízko vody alebo miest, kde by sa voda mohla rozliať na produkt. NEPOUŽÍVAJTE FaceGLO, ak si myslíte, že sa dostal do kontaktu s vodou.
- Držte FaceGLO ďalej od HORÚCICH povrchov.
- NIKDY sa nepokúšajte FaceGLO nijako opravovať. Oprava FaceGLO vám zruší záruku. FaceGLO neobsahuje žiadne vymeniteľné alebo opraviteľné súčiastky.
- NEPOUŽÍVAJTE FaceGLO, ak je maska, ovládač alebo nabíjací kábel akokoľvek poškodený.
- Remienky FaceGLO obsahujú zmes polyesteru, nylonu a lycry. Ak ste alergický na niektorý z týchto materiálov, je možné, že nebudete môcť používať priložený popruh na hlavu.
- NEPOUŽÍVAJTE FaceGLO LED masku, ak trpíte bolesťami hlavy spôsobenými svetlom.
- Nezasúvajte prednú zástrčku do zásuvky bez pripojeného adaptéra.
- NEZDIEĽAJTE FaceGLO s nikým iným. FaceGLO je navrhnutý len pre jedného používateľa.
- NEPOUŽÍVAJTE zariadenie častejšie, než sa odporúča.

Fotosenzitivita je bežným vedľajším účinkom rôznych liekov. Patria sem určité antibiotiká, chemoterapeutika a diuretiká. Ak si nie ste istí liekom, možno by ste sa mali poradiť so svojím lekárom.

Aj iné látky, ktoré nie sú uvedené vyššie, môžu spôsobovať

fotosenzitivitu. Bežné príklady týchto látok sú:

Ľubovník bodkovaný, decht, deodoranty, antibakteriálne mydlá, umelé sladidlá, naftalen (naftalén), ropné produkty, zosvetľovacie látky obsiahnuté v pracích prostriedkoch a síran kadmia (chemikália vstrekaná do pokožky počas tetovania).

ZAVEDENIE

FaceGlo je vhodný pre dospelých, ktorí chcú znížiť tvorbu hlbokých vrások na tvár.

S pribúdajúcim vekom je pokožka tenšia a suchšia, môžu sa objaviť ochabnuté a vrásky v dôsledku straty kolagénu a zníženej elasticity tkanív. Starnúca pokožka je tiež náchylnejšia na hnedé škvrny a pigmentáciu. Dermis pokožky môže s vekom stratiť 20 % až 80 % svojej hrúbky.

FaceGLO používa klinicky overené vlnové dĺžky v červenej a blízkej infračervenej oblasti svetelného spektra (600 nm až 1100 nm). V klinických štúdiách sa ukázalo, že tieto vlnové dĺžky stimulujú bunky produkujúce kolagén a elastín prostredníctvom procesu nazývaného fotobiomodulácia.

FaceGLO bol navrhnutý tak, aby dodával svetlo priamo do pokožky, čím zabezpečuje, že maximálne množstvo svetla zasiahne svoje bunkové ciele.

FaceGLO je voľnopredajné domáce zariadenie pre dospelých, navrhnuté na prenos energie z červenej a blízkej infračervenej oblasti svetelného spektra s cieľom odstrániť hlboké vrásky na tvári.

O PRODUKTE

❶ Popruh na hlavu - háčik

❷ Popruh na hlavu - slučka

❸ Tvárová maska

❹ Krytky na oči

❺ Adaptér s konektory

❻ Úložný vak

❼ USB-C zásuvka

❽ Ovládanie

❾ Zapnuto/vypnuto

❿ LED svetlá

⓫ USB zásuvka

+ Photology svetelná maska

TEST CITLIVOSTI

Pred prvou liečbou je potrebné vykonať test citlivosti.

1. Vyčistite pokožku na vnútornej strane predlaktia, aby ste odstránili všetky kozmetické látky, ako je opaľovací krém.
2. Umiestnite FaceGLO na vnútornú stranu predlaktia, pričom LED diódy smerujú k pokožke.
3. Zapnite ovládač a nastavte FaceGLO na 10-minútový liečebný program.
4. Ak vám maska páli pokožku alebo je ošetrovanie nepríjemné, okamžite ukončíte program a zariadenie vypnite.
5. Po liečbe počkajte aspoň 6 hodín. Ak je koža na vnútornej strane predlaktia stále červená alebo podráždená, FaceGLO pre vás nie je vhodný.

KRYTKY NA OČI

Svetlo použité vo vašom FaceGLO je síce úplne bezpečné, ale môže sa vám zdať príliš jasné. Ak máte pocit, že LED svetlo musí byť menej jasné, môžete použiť ochranné kryty na oči pre vyššiu úroveň pohodlia. Chrániče očí sa ľahko pripevnia priamo do očných otvorov.



Očné kryty spĺňajú všetky príslušné normy bezpečnosti očí (IEC 62471:2006).

NABÍJANIE


Na nabíjanie FaceGLO vložte napájací adaptér do USB-C zásuvky ovládača. Zapojte AC/DC adaptér do AC adaptéra a zapnite ho. Tri LED diódy na radiacej jednotke začnú blikať, aby signalizovali nabíjanie. Keď sú plne nabité, všetky tri LED sa rozsvietia.

Poznámka: Vždy plne nabíjajte zariadenie, kým posledná LED neprestane blikať. FaceGLO nefunguje počas nabíjania.

ZAČÍNAME

Pred každým použitím vyčistite masku FaceGLO, pričom zariadenie je vypnuté. Pozrite si pokyny na čistenie. FaceGLO je vybavený nastaviteľnými popruhmi, ktoré umožňujú pohodlné nosenie rúška.

Na nasadenie masky prevlečte popruh cez otvory na oboch stranách masky a spojte ich háčikmi a očkami.

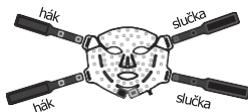

Omotajte popruhy okolo hlavy a pevne ich upevnite háčikmi a očkami.

Upravte čelo a bradu tak, aby maska presne sedela. Pre najlepšie výsledky sa uistite, že masku nosíte čo najbližšie k čelu a brade.



OŠETRENIE

Pre najlepšie výsledky ošetrujte pokožku 3-5 dní v týždni, minimálne 6 týždňov. Udržiavacie ošetrenia by sa mali vykonávať podľa potreby, v závislosti od životného štýlu a kožného stavu.

Ošetrovanie FaceGLO:

1. Vyčistite si pleť, aby ste odstránili všetku kozmetiku.
2. Nasadte si zariadenie FaceGLO na tvár, upravte bradu a čelo masky tak, aby sedelo, a pripevnite popruhy okolo hlavy.
3. Stlačte tlačidlo On/Off na zapnutie. Zariadenie sa automaticky vypne po desiatich minútach. Liečbu môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla On/Off.
4. Na konci liečby si zložte masku.
5. Naneste svoj bežný hydratačný krém alebo opaľovací krém.

Poznámka:

Bezprostredne po ošetrovaní môže koža sčervenat'.

Do 1-2 hodín by sa to malo vrátiť do normálu.

Po liečbe:

- Niektorí používatelia hlásili olupovanie pokožky, súvisiace svrbenie a suchosť. Ide o dočasný jav, ktorý zmizne v priebehu niekoľkých dní. Dočasné bolesti hlavy sa môžu objaviť ihneď po liečbe. Hoci toto zariadenie vyžaruje úrovně viditeľného a blízkeho infračerveného svetla, ktoré sú považované za bezpečné pre pokožku. Ak si všimnete nežiaducu reakciu po používaní zariadenia, mali by ste okamžite prestať s ňou, ktorá zmizne v priebehu niekoľkých dní. Dočasné bolesti hlavy sa môžu objaviť ihneď po liečbe. Hoci toto zariadenie vyžaruje úrovně viditeľného a blízkeho infračerveného svetla, ktoré sú považované za bezpečné pre pokožku. Ak po používaní zariadenia zažijete nežiaducu reakciu, mali by ste zariadenie okamžite prestať používať.

Balíček obsahuje svetelnú masku Photology Chlorophyll.

Táto maska optimalizuje vašu Face Glo terapiu červeným svetlom tým, že zosilňuje a odráža svetlo späť do pokožky. Obsahuje chlorofyl α - β , rastlinné kmeňové bunky a svetlofluorescenčné cyanobaktérie. Po nanosení presmerováva červené svetlo produkujúce kolagén späť na pokožku, čím optimalizuje účinky červeného svetla a dlhodobé anti-aging výsledky.

Ako to funguje?

Počas LED terapie červeným svetlom môže pokožka odrážať vysoké percento svetla. Chlorophyll Light Mask absorbuje toto odrazené červené svetlo a vracia ho späť do pokožky ako blízke červené a vzdialené červené svetlo, čím dramaticky zvyšuje účinnosť ošetrenia.

Nepoužívajte, ak máte alergiu alebo precitlivosť na niektorú zo zložiek.

Vyhýbajte sa kontaktu s očami.

V prípade kontaktu s očami dôkladne vypláchnite teplou vodou.

Nepoužívajte na poškodenú pokožku.

Držte mimo dosahu detí.

Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.


Nekonzumujte. Len na vonkajšie použitie.

Návod na použitie:

Vždy vykonajte test na malej ploche pokožky (testovací sáčok) pred otvorením balenia produktu. Použitie počas LED červeného svetelného ošetrenia.

1. Očistite si pokožku.
2. Naneste tenkú vrstvu masky na tvár a/alebo krk.
3. Nechajte ho vsiaknuť a aplikujte červené svetlo.
4. Jemne zmyjte masku z tváre a osušte ju čistým, suchým uterákom.

*Kompatibilné s akýmkoľvek zariadením na terapiu červeným svetlom. Používajte podľa pokynov výrobcu. Počas LED terapie môže pokožka odraziť až 60 % svetla, najmä pri panelových svetlách. Na maximálne využitie svetla potrebného na výrobu kolagénu sa používa zmes chlorofylu- β , rastlinných kmeňových buniek a fluorescenčných cyanobaktérií (modrozelených rias), ktorá absorbuje svetlo a dodáva ho do kože. Týmto spôsobom sa cenné svetlo nestráca, ale využíva sa na maximum.

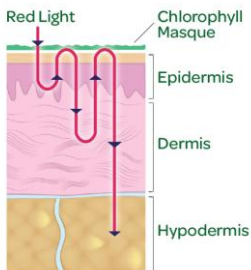

ČISTENIE

Pred každým použitím, keď je zariadenie vypnuté, vyčistite rúško podľa nižšie uvedených pokynov na čistenie.

1. Uistite sa, že zariadenie sa pri čistení NENABÍJA.
2. Pleťovú masku vyčistite vlhkou čistou handričkou. Odolné škvrny sa dajú odstrániť jemným utretím 70% alkoholom. NEPOUŽÍVAJTE žiadne iné čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť plasty.
3. Ovládač vyčistite vlhkou, čistou handričkou.

SKLADOVANIE

Uskladňujte FaceGLO pri izbovej teplote na suchom mieste. Použite priloženú tašku. Vyhnite sa skladovaniu FaceGLO v prašných prostrediach, priamom slnečnom svetle alebo v vlhkých a vlhkých podmienkach.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Žiadne červené ani infračervené svetlo z FaceGLO	Maska nie je nabitá	Zapojte ovládač do Adaptér a nabíjanie masky. Až kým na ovládači nezostanú 3 rozsvietené svetlá, ktoré NEBLIKAJÚ.
Žiadne červené ani infračervené svetlo z FaceGLO.	Zariadenie je pripojené k sieti.	Odpojte USB-C konektor od ovládača.
LED diódy sa NEVYPNÚ po 10 minútach.	Zariadenie je chybné.	Vráťte rúško predajcovi.
LED diódy blikajú počas liečby.	Zariadenie je chybné.	Vráťte rúško predajcovi.



LIKVIDÁCIA

Smernica o odpadoch, elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) (2012/19/EÚ) bola zavedená s cieľom recyklovať produkty s využitím najlepších dostupných techník zberu a recyklácie, minimalizovať environmentálny dopad, zaobchádzať s nebezpečnými látkami a predchádzať rastúcemu počtu skládok. Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto prosím zabezpečte, aby bol na konci svojej životnosti správne zlikvidovaný v súlade s požiadavkami miestnych úradov. Nesmie sa vyhadzovať s domácom odpadom.

Recyklujte zodpovedne:

Skontrolujte si miestne mestské predpisy.

Oddelte komponenty a správne ich zlikvidujte.

ŠPECIFIKÁCIA

Vstup ovládača: 5V 800mA 

Vstup do masky: 5V 450mA (CC)



Tento produkt je v súlade s platnou legislatívou EÚ o výrobkoch.



Tento symbol označuje USB konektor.



Prosím, pred použitím si tieto pokyny dôkladne prečítajte a potom si ich uchovajte pre budúce použitie.



Tento symbol označuje, že zariadenie používa lítium-iónovú polymérovú batériu.



Symbol triedy III (IEC 60417-5180)



Tento produkt je určený výhradne na použitie



Vnútorne použitie.



Isolácia triedy II



Tento symbol označuje, že zariadenie je chránené pred priamym slnečným svetlom.



Táto jednotka spĺňa aktuálnu legislatívu UKCA o produktoch.



Jednosmerný prúd



Odnímateľný napájací zdroj IEC 60417-6181



Recyklačný papier

Modelové číslo: FCLT3-PCPS

Čas programu: 10 minút ±
11 sekúnd

Vlnovej dĺžky:

- 630nm ± 10nm
- 830nm ± 10nm
- 1072 nm ± 20 nm

Maximálna intenzita vzostupu:

30mW/cm²

Prevádzková teplota:

0°C až 30°C (32°F až 86°F)

Teplota skladovania a prepravy:

-5°C až 55°C (23°F až 131°F)

Prevádzková vlhkosť:

30 % až 95 % nekondenzujúce

Ukladanie a transport vlhkosti:

20 % až 85 % nekondenzujúce

Elektrický vstup z adaptéru: 100-240Vac, 50/60Hz. 0,25A

Elektrický výstup: 5V, 1A IP22

ZÁKAZNÍCKA STAROSTLIVOSŤ

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na: online@riobeauty.com

Ak si chcete znovu objednať doplnky, navštívte prosím stránku
www.riobeauty.com alebo kontaktujte svojho miestneho distribútora.

KONTAKTUJTE ODDELENIE SŤAŽNOSTÍ:

Exkluzívny dovozca a distribútor pre Českú republiku a Slovensko:

BORGY CZ, a.s.

Sťažnosti / služba

Zápy 4 (komplex RTK), 250 01 Zápy, Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz



UK Product RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Anglie, GL53 7ET
Produkt EÚ RP: The Dezac Group (Európa) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Nizozemsko

©The Dezac Group Ltd 2025, PO Box 17, Cheltenham Spa, Anglie GL53 7ET

www.riobeauty.com

1-IN-FCLT3-EU/1.0