

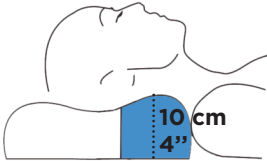



Réf. C100P

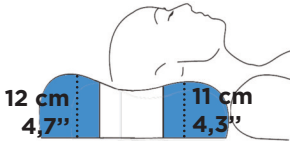


Réf. C150P

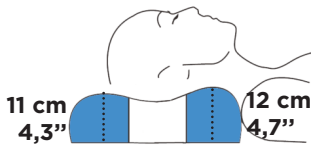

Réf. C120P

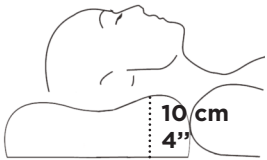

Réf. C130P

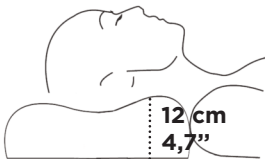

REF						REF POKROWIEC / KRYT / BETRAEK / SKYDD / الغطاء / 保護墊
C100P50401HS		50 cm / 20"	40 cm / 16"	10 cm / 4"	1,2 kg / 2,6 lbs	C100HE5040S
C150P50401HV		50 cm / 20"	40 cm / 16"	12 cm / 4,7"	1,7 kg / 3,7 lbs	C110HE5040S
C120P50321HV		50 cm / 20"	32 cm / 13"	10 cm / 4"	1,2 kg / 2,6 lbs	C120HE5032V
C130P60401HV		60 cm / 23"	40 cm / 16"	12 cm / 4,7"	2,2 kg / 4,8 lbs	C130HE6040V



PL **OBJAŚNIENIA**
PODUSZKA ERGONOMICZNA

SV **FÖRKLARANDE INFORMATION**
ERGONOMISK KUDDE

CS **VYSVĚTLIVKY**
ERGONOMICKÁ PODUŠKA

AR **معلومات توضيحية**
الوسادة المريحة

DA **FORKLARENDE OPLYSNINGER**
ERGONOMISK PUDE

ZH **說明資訊**
符合人體工學的枕頭

PL Gratulujemy zakupu ergonomicznej poduszki na szyję SYST'AM®. Postępując zgodnie z poniższymi radami, z pewnością będą Państwo codziennie odczuwali odprężenie, relaks i dobre samopoczucie.

INSTALACJA

Założyć pokrowiec na ergonomiczną poduszkę na szyję i położyć ją na materacu, zastępując starą poduszkę. Sprawdź, czy jest ustawiona we właściwym kierunku (**patrz: rys. 1**). Ergonomiczną poduszkę na szyję można również umieścić w zwykłej poszewce na poduszkę. Poduszka SYST'AM® jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów morfologii. Czasami jednak, aby się przyzwyczaić, potrzebny jest okres dostosowania trwający kilka dni. Idealny zakres temperatur roboczych wynosi od 10 °C do 40 °C (od 50 °F do 104 °F).

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Ze względów higienicznych zaleca się używanie poduszki tylko przez jedną osobę. Zalecamy zakup drugiego pokrowca, aby móc go używać, gdy pierwszy pokrowiec jest brany. Długotrwałe używanie bez pokrowca może skrócić żywotność poduszki. Podczas użytkowania należy upewnić się, że między głową a poduszką znajduje się tylko poszewka na poduszkę. Nie podwyższać poduszki za pomocą podgłówna, poduszki ani innych akcesoriów i pokrowca. Nie używać poduszki SYST'AM® do odciążania pozostałych części ciała z wyjątkiem tych, do

kórych jest przeznaczona (wglębie nie na szyję i głowę).

Należy koniecznie przestrzegać właściwego ułożenia poduszki SYST'AM®, zgodnie z tym, co zostało pokazane na rys. 1.

Nie wolno wystawiać poduszki na działanie otwartego ognia lub żaru (zapalniczki, papierosów, otwartego płomienia itp.), ani używać go w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła (grzejnik, grzejnik elektryczny itp.). W przypadku szczególnej choroby albo uporczywego bólu, mimo korzystania z poduszki SYST'AM®, należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania porady medycznej. Nie polykać wypełniacza, ponieważ grozi to uduszeniem.

Nie nadaje się dla pacjentów niższych niż 120 cm. Podczas otwierania opakowania poduszka może mieć delikatny zapach. W takim przypadku należy przewietrzyć poduszkę przed pierwszym użyciem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać na płasko. W przypadku długiego okresu przechowywania trzymać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od ciepła i światła.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Poduszka SYST'AM® wykonana jest z materiału najwyższej jakości. Aby jednak zachować trwałość, komfort użytkowania i odpowiedni stan, należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji w zakresie czyszczenia:

určena (prohlubeň krku a hlava). Ujistěte se, že respektujete správné umístění podušky SYST'AM®, jak je znázorněno na obr. 1.

Nevystavujte podušku otevřenému plamenu nebo žhavému materiálu (zapalovač, cigareta, otevřený oheň apod.) ani ji nepoužívejte v blízkosti přímého zdroje tepla (topení, elektrický ohřívač atd.). V případě určité patologie nebo přetrvávající bolesti, navzdory použití podušky SYST'AM®, se poraďte se svým lékařem. Výpělí nepolykejte, mohlo by to způsobit udušení. Není vhodná pro pacienta menšího než 120 centimetrů. Poduška může při otvírání obalu vykazovat mírný zápach. Pokud tomu tak je, měli byste podušku před prvním použitím vyvětrat.

Poduška SYST'AM® je vhodná pro všechny typy morfologie. Přesto je někdy nutná doba adaptace několika dní, aby si na ni vaše tělo zvyklo.

Podušku můžete při otvírání obalu vykazovat mírný zápach. Pokud tomu tak je, měli byste podušku před prvním použitím vyvětrat.

Poduška SYST'AM® je vhodná pro všechny typy morfologie. Přesto je někdy nutná doba adaptace několika dní, aby si na ni vaše tělo zvyklo.

Podušku můžete při otvírání obalu vykazovat mírný zápach. Pokud tomu tak je, měli byste podušku před prvním použitím vyvětrat.

Poduszka: Czyszczenie powierzchni przy użyciu ściereczki/gąbki lekko nasączonej wodą z mydłem, a następnie opłukanie przy użyciu ściereczki/gąbki lekko nasączonej czystą wodą.

Pokrowiec:

Prac w 60 °C. Nie używać środków zawierających wybielacz. Prasować w umiarkowanej temperaturze. Czyścić na sucho rozpuszczalnikami typu P. Nie suszyć w suszarce. Suszyć na świeżym powietrzu.

Poduszka SYST'AM® jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów morfologii. Czasami jednak, aby się przyzwyczaić, potrzebny jest okres dostosowania trwający kilka dni.

Podczas otwierania opakowania poduszka może mieć delikatny zapach. W takim przypadku należy przewietrzyć poduszkę przed pierwszym użyciem.

SPECYFIKACJA - BUDOWA

Pianka: Poliuretanowa, hipoaergiczna pianka o jakości medycznej

Bardzo duża gęstość - CFC 0%

Pokrowiec: bawełna 75% – poliester 25%

GWARANCJA

Trzyletnia gwarancja na zmiany fizyczne i wady prowadzące do widocznych śladów (< 2 cm) na materiale. Dwa lata od daty zakupu przez klienta na wszelkie wady fabryczne. W przypadku wystąpienia wad fabrycznych prosimy skontaktować się ze sprzedawcą, podając numer produktu i numer partii. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania wspornika. Gwarancja nie obejmuje normalnej utraty elastyczności ani żadnych zmian właściwości i / lub kolorów, które nie mają wpływu na właściwości odciążające poduszki.

Povlak: Perte na 60 °C. Nepoužívejte produkty obsahující bělidlo. Zehlejte při mírné teplotě. Chemické čištění rozpouštědly typu P. Nesušte v sušičce. Sušte na čerstvém vzduchu.

Poduška SYST'AM® je vhodná pro všechny typy morfologie. Přesto je někdy nutná doba adaptace několika dní, aby si na ni vaše tělo zvyklo.

Podušku můžete při otvírání obalu vykazovat mírný zápach. Pokud tomu tak je, měli byste podušku před prvním použitím vyvětrat.

Poduška SYST'AM® je vhodná pro všechny typy morfologie. Přesto je někdy nutná doba adaptace několika dní, aby si na ni vaše tělo zvyklo.

Podušku můžete při otvírání obalu vykazovat mírný zápach. Pokud tomu tak je, měli byste podušku před prvním použitím vyvětrat.

Poduška SYST'AM® je vhodná pro všechny typy morfologie. Přesto je někdy nutná doba adaptace několika dní, aby si na ni vaše tělo zvyklo.

Podušku můžete při otvírání obalu vykazovat mírný zápach. Pokud tomu tak je, měli byste podušku před prvním použitím vyvětrat.

Poduška SYST'AM® je vhodná pro všechny typy morfologie. Přesto je někdy nutná doba adaptace několika dní, aby si na ni vaše tělo zvyklo.

Podušku můžete při otvírání obalu vykazovat mírný zápach. Pokud tomu tak je, měli byste podušku před prvním použitím vyvětrat.

DA Vi lykønsker dig med købet af den cervikale ergonomiske pude gennem SYST'AM®. Du kan være sikker på at få glæde, afslapning og velvære hver dag ved at følge nedenstående rådgivning.

INSTALLATION

Kom betræk på din ergonomiske cervikale pude og læg den på din madras, i stedet for og på samme sted som din gamle pude. Sørg for, at det vender den rigtige vej op (**se fig. 1**). Din cervikale ergonomiske pude, kan også sættes ind i et normalt pudebetræk. SYST'AM® puden er velegnet til alle former for morfologi. Ikke desto mindre kræves nogle gange en tilpasning på nogle få dage, for at din krop kan vænne sig til den.

Det ideelle temperaturområde ved brug er mellem 10°C og 40°C (50°F til 104°F).

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER FOR ANVENDELSE

Af hygiejnehensyn anbefales det, at kun én person bruger puden. Vi anbefaler, at der købes et ekstra betræk til brug, når den andet vaskes. Langvarig brug uden betræk kan påvirke levetiden for din pude. Når den er i brug, skal du sikre dig, at der kun er pudebetræk mellem hovedet og puden. Løft ikke puden ved hjælp af en forstærkning, pude eller andet tilbehør eller omslag. Løft ikke puden ved hjælp af en forstærkning, pude eller andet tilbehør eller omslag. Brug ikke SYST'AM®-puden til at lindre andre dele af kroppen, undtagen de den er beregnet til (hulningen ved halsen og hovedet).

Poduszka SYST'AM® wykonana jest z materiału najwyższej jakości. Aby jednak zachować trwałość, komfort użytkowania i odpowiedni stan, należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji w zakresie czyszczenia:

SV Vi lyckönskar er till förvärvet av SYST'AM® ergonomisk nackkudde. Du kan vara säkra på att få glädje, avkoppling och värna välbefinnande varje dag genom att följa de råd som ges nedan.

INSTALLATION

Sätt överdraget på din ergonomiska kudde och placera den på din madrass istället för och på samma plats som din gamla kudde. Säkerställ att du har rätt sida upp (**se bild 1**). Du kan också använda ett vanligt örngott till din ergonomiska nackkudde. SYST'AM®-kudden passar alla morfologityper. Det är dock inte ovanligt med en viss anpassningsperiod på ett par dagar så att din kropp kan vänja sig vid den.

Det ideala temperaturintervallet vid användning är mellan 10°C till 40°C (50 °F till 104°F).

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING

Av hygieniskäl rekommenderar vi att endast en person använder kudden. Vi rekommenderar att du köper ytterligare ett överdrag som sedan kan användas när det andra tvättas. Långvarig användning utan skydd kan påverka din kuddes livslängd. När du använder kudden ska du säkerställa att inget annat än örngottet placeras mellan huvudet och kudden. Höj inte kudden med hjälp av ett stöd, en kudde eller andra tillbehör eller överdrag. Höj inte kudden med hjälp av ett stöd, en kudde eller andra tillbehör eller överdrag.

Sørg for at respektere den korrekte placering af SYST'AM® puden, som vist på fig. 1. Udsæt ikke puden for åben ild eller glødemateriale (lighter, cigaret, åben ild osv.) eller brug tæt på en direkte varmekilde (radiator, elvarmer mv.). I tilfælde af særlig patologi eller vedvarende smerte, på trods af brugen af SYSTEM® puden, skal du konsultere din læge for lægehjælp. Slug ikke fyldet, det kan forårsage kvælning. Ikke egnet til patienter mindre end 47 tommer (1,1 m). Puden kan have en svag lugt, når du åbner pakken. I så fald skal du ventilere puden før første brug.

OPBEVARINGSFORHOLD

Skal opbevares liggende fladt. Ved langvarig opbevaring, skal den opbevares tørt og tempereret, væk fra lys og varme.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Denne SYST'AM® pude er lavet af kvalitetsmateriale. For at bevare dens egenskaber, komfort og velvære skal du dog følge de følgende rengøringsanvisninger omhyggeligt:

Pude:

Overflade rengøring med en serviet / svamp let fugtet med sæbevand og efterfølgende afskylning med en serviet / svamp let fugtet med rent vand.

Använd inte SYST'AM®-kudden för att lätta andra delar av kroppen, förutom de för vilka den är avsedd (nacken och huvudet). Var noga med att respektera den korrekta positioneringen av SYST'AM®-kudden, enligt bild 1.

Utsätt inte kudden för öppen eld eller glödande material (tändare, cigarett, öppen eld, etc.), och använd inte heller i närheten av en direkt värmekälla (element, elvärmare etc.). Vid speciellt sjukdomstillstånd eller ihållande smärta, trots användning av SYSTEM®-kudden, kontakta din läkare för medicinsk rådgivning. Svälj inte fyllning, detta kan orsaka kvävning. Ej lämplig för patient kortare än 1,1 m. Det kan hända att kudden har en lätt lukt när paketet öppnas. Om så är fallet bör du lufta kudden före första användning.

LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN

Måste förvaras platt. Långvarig förvaring bör ske på en torr och tempererad plats, på avstånd från ljus och värme.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Denna SYST'AM®kudde är tillverkad av kvalitativt material. För att bevara dess egenskaper, komfort och känslan av välbefinnande bör du noggrant följa dessa rengöringsanvisningar:

Kudde:

Rengör ytan med en trasa/svamp som fuktats lätt med tvålatten och skölj sedan med en trasa/svamp som fuktats lätt med rent vatten.

Betræk:

يكون تنظيف السطح باستخدام/مسحة/ قطعة من الإسفنج مبللة قليلاً بماء بصابون ثم شطفه بمسحة/ قطعة من الإسفنج مبللة قليلاً بماء نظيف.

Vask ved 60°C. Brug ikke produkter der indeholder blegemiddel. Stryges ved moderat temperatur. Kemisk rensning med P opløsningsmidler. Må ikke tørretumbles. Tørres i frisk luft.

SPECIFIKATIONER SAMMENSÆTNINGER

Skum: Polyurethan hypoallergen medicinsk kvalitetsskum. Meget høj tæthed - 0% CFC Betræk: 75% bomuld - 25% polyester

GARANTI

Tre års garanti mod fysisk modifikation eller fejl, der medfører synlige aftryk (<2 cm) på materialet. To år mod fabriktionsfejl, fra datoen for kundens køb. I tilfælde af misligholdelse, bedes du kontakte din forhandler og give dem produktets serienummer / partinummer. Garantien dækker ikke misbrug af underlaget. Garantien dækker ikke det normale tab af fasthed eller ændringer i egenskaberne og / eller farverne, der ikke påvirker pudeens trykaflastningsegenskaber.

Garanti: Tre års garanti mot fysisk modifiering eller defekter som leder till att synliga avtryck uppstår (< 2 cm) på materialet. Två år mot fabriktionsfel, från kundens köpdatum. Vid fel, kontakta din återförsäljare och ange produktens serienummer/partinummer. Garantin täcker inte felanvändning av stödet. Garantin täcker inte den normala förlusten av fasthet eller förändringar i egenskaper och/eller färger som inte påverkar kuddens tryckavlastningsegenskaper.

Garanti: Tre års garanti mot fysisk modifiering eller defekter som leder till att synliga avtryck uppstår (< 2 cm) på materialet. Två år mot fabriktionsfel, från kundens köpdatum. Vid fel, kontakta din återförsäljare och ange produktens serienummer/partinummer. Garantin täcker inte felanvändning av stödet. Garantin täcker inte den normala förlusten av fasthet eller förändringar i egenskaper och/eller färger som inte påverkar kuddens tryckavlastningsegenskaper.

Garanti: Tre års garanti mot fysisk modifiering eller defekter som leder till att synliga avtryck uppstår (< 2 cm) på materialet. Två år mot fabriktionsfel, från kundens köpdatum. Vid fel, kontakta din återförsäljare och ange produktens serienummer/partinummer. Garantin täcker inte felanvändning av stödet. Garantin täcker inte den normala förlusten av fasthet eller förändringar i egenskaper och/eller färger som inte påverkar kuddens tryckavlastningsegenskaper.

Skydd:

Tvättas i 60°C. Använd inte produkter som innehåller blekmedel. Stryk på låg temperatur. Rengör med P-lösningsmedel. Torktumlå inte. Låt lufttorka.

Tvättas i 60°C. Använd inte produkter som innehåller blekmedel. Stryk på låg temperatur. Rengör med P-lösningsmedel. Torktumlå inte. Låt lufttorka.

SÅRSKILD SAMMANSÄTTNING

Skum: Medicinskt kvalitetsskum i allergivänlig polyuretan. Mycket hög densitet - 0 % CFC Skydd: 75 % bomull – 25 % polyester

GARANTI

Tre års garanti mot fysisk modifiering eller defekter som leder till att synliga avtryck uppstår (< 2 cm) på materialet. Två år mot fabriktionsfel, från kundens köpdatum. Vid fel, kontakta din återförsäljare och ange produktens serienummer/partinummer. Garantin täcker inte felanvändning av stödet. Garantin täcker inte den normala förlusten av fasthet eller förändringar i egenskaper och/eller färger som inte påverkar kuddens tryckavlastningsegenskaper.

Garanti: Tre års garanti mot fysisk modifiering eller defekter som leder till att synliga avtryck uppstår (< 2 cm) på materialet. Två år mot fabriktionsfel, från kundens köpdatum. Vid fel, kontakta din återförsäljare och ange produktens serienummer/partinummer. Garantin täcker inte felanvändning av stödet. Garantin täcker inte den normala förlusten av fasthet eller förändringar i egenskaper och/eller färger som inte påverkar kuddens tryckavlastningsegenskaper.

Garanti: Tre års garanti mot fysisk modifiering eller defekter som leder till att synliga avtryck uppstår (< 2 cm) på materialet. Två år mot fabriktionsfel, från kundens köpdatum. Vid fel, kontakta din återförsäljare och ange produktens serienummer/partinummer. Garantin täcker inte felanvändning av stödet. Garantin täcker inte den normala förlusten av fasthet eller förändringar i egenskaper och/eller färger som inte påverkar kuddens tryckavlastningsegenskaper.

الوسادة: لا تستخدم وسادة SYST'AM® لتخفيف ألم أجزاء أخرى من الجسم ما عدا تلك المُخصَّصة لها (تجفيف الرقبة والراس).

أحرص على مراعاة الوضع الصحيح لوسادة SYST'AM® على النحو الموضح في الشكل رقم 1.

لا تعرّض الوسادة إلى مصدر لهب مكثوف أو مادة متوهجة (قداحة أو سيجارة أو نار غير مغطاة، وما إلى ذلك)، ولا تستخدمها بالقرب من مصدر الحرارة المباشر (مشعاع حراري أو سخان كهربائي، وما إلى ذلك).

في حالة وجود أمراض معيَّنة أو ألم مستمر، على الرغم من استخدام وسادة SYST'AM®، استشر طبيبيك للحصول على النصيحة الطبية.

لا تتنعل الحشو الذي يمكن أن يسبب اختناقًا. غير مناسبة للمريض الذي يقل طوله عن 47 بوصة. قد يكون للوسادة رائحة خفيفة عند فتح العبوة. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك تهوية الوسادة قبل استخدامها لأول مرّة.

مكونات الموصافات

القوم: فوم طبي عالي الجودة من البولي يوريثان مضاد للحساسية.

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪

ظروف التخزين

يجب أن يتمّ التخزين في وضع الاستلقاء. وللتخزين على المدى الطويل، ضعها في مكان جاف ومعتدل الحرارة بعيدًا عن مصادر الضوء والحرارة.

الصيانة والتنظيف

هذه الوسادة من طراز SYST'AM® مصنوعة من مواد عالية الجودة. ومع ذلك، فلكي يتسنى الحفاظ على فترة صلاحية خصائصها والراحة التي تقدمها وجودة حالتها، يُرجى اتباع تعليمات التنظيف التالية بدقة:

الوسادة في تخفيف الضغط.

هذه الوسادة من طراز SYST'AM® مصنوعة من مواد عالية الجودة. ومع ذلك، فلكي يتسنى الحفاظ على فترة صلاحية خصائصها والراحة التي تقدمها وجودة حالتها، يُرجى اتباع تعليمات التنظيف التالية بدقة:

الوسادة: لا تستخدم وسادة SYST'AM® لتخفيف ألم أجزاء أخرى من الجسم ما عدا تلك المُخصَّصة لها (تجفيف الرقبة والراس).

أحرص على مراعاة الوضع الصحيح لوسادة SYST'AM® على النحو الموضح في الشكل رقم 1.

لا تعرّض الوسادة إلى مصدر لهب مكثوف أو مادة متوهجة (قداحة أو سيجارة أو نار غير مغطاة، وما إلى ذلك)، ولا تستخدمها بالقرب من مصدر الحرارة المباشر (مشعاع حراري أو سخان كهربائي، وما إلى ذلك).

في حالة وجود أمراض معيَّنة أو ألم مستمر، على الرغم من استخدام وسادة SYST'AM®، استشر طبيبيك للحصول على النصيحة الطبية.

لا تتنعل الحشو الذي يمكن أن يسبب اختناقًا. غير مناسبة للمريض الذي يقل طوله عن 47 بوصة. قد يكون للوسادة رائحة خفيفة عند فتح العبوة. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك تهوية الوسادة قبل استخدامها لأول مرّة.

مكونات الموصافات

القوم: فوم طبي عالي الجودة من البولي يوريثان مضاد للحساسية.

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪

ظروف التخزين

يجب أن يتمّ التخزين في وضع الاستلقاء. وللتخزين على المدى الطويل، ضعها في مكان جاف ومعتدل الحرارة بعيدًا عن مصادر الضوء والحرارة.

الصيانة والتنظيف

هذه الوسادة من طراز SYST'AM® مصنوعة من مواد عالية الجودة. ومع ذلك، فلكي يتسنى الحفاظ على فترة صلاحية خصائصها والراحة التي تقدمها وجودة حالتها، يُرجى اتباع تعليمات التنظيف التالية بدقة:

مكونات الموصافات

القوم: فوم طبي عالي الجودة من البولي يوريثان مضاد للحساسية.

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪

ظروف التخزين

يجب أن يتمّ التخزين في وضع الاستلقاء. وللتخزين على المدى الطويل، ضعها في مكان جاف ومعتدل الحرارة بعيدًا عن مصادر الضوء والحرارة.

الصيانة والتنظيف

هذه الوسادة من طراز SYST'AM® مصنوعة من مواد عالية الجودة. ومع ذلك، فلكي يتسنى الحفاظ على فترة صلاحية خصائصها والراحة التي تقدمها وجودة حالتها، يُرجى اتباع تعليمات التنظيف التالية بدقة:

مكونات الموصافات

القوم: فوم طبي عالي الجودة من البولي يوريثان مضاد للحساسية.

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪

هذه الوسادة من طراز SYST'AM® مصنوعة من مواد عالية الجودة. ومع ذلك، فلكي يتسنى الحفاظ على فترة صلاحية خصائصها والراحة التي تقدمها وجودة حالتها، يُرجى اتباع تعليمات التنظيف التالية بدقة:

الوسادة: لا تستخدم وسادة SYST'AM® لتخفيف ألم أجزاء أخرى من الجسم ما عدا تلك المُخصَّصة لها (تجفيف الرقبة والراس).

أحرص على مراعاة الوضع الصحيح لوسادة SYST'AM® على النحو الموضح في الشكل رقم 1.

لا تعرّض الوسادة إلى مصدر لهب مكثوف أو مادة متوهجة (قداحة أو سيجارة أو نار غير مغطاة، وما إلى ذلك)، ولا تستخدمها بالقرب من مصدر الحرارة المباشر (مشعاع حراري أو سخان كهربائي، وما إلى ذلك).

في حالة وجود أمراض معيَّنة أو ألم مستمر، على الرغم من استخدام وسادة SYST'AM®، استشر طبيبيك للحصول على النصيحة الطبية.

لا تتنعل الحشو الذي يمكن أن يسبب اختناقًا. غير مناسبة للمريض الذي يقل طوله عن 47 بوصة. قد يكون للوسادة رائحة خفيفة عند فتح العبوة. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك تهوية الوسادة قبل استخدامها لأول مرّة.

مكونات الموصافات

القوم: فوم طبي عالي الجودة من البولي يوريثان مضاد للحساسية.

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪

ظروف التخزين

يجب أن يتمّ التخزين في وضع الاستلقاء. وللتخزين على المدى الطويل، ضعها في مكان جاف ومعتدل الحرارة بعيدًا عن مصادر الضوء والحرارة.

الصيانة والتنظيف

هذه الوسادة من طراز SYST'AM® مصنوعة من مواد عالية الجودة. ومع ذلك، فلكي يتسنى الحفاظ على فترة صلاحية خصائصها والراحة التي تقدمها وجودة حالتها، يُرجى اتباع تعليمات التنظيف التالية بدقة:

مكونات الموصافات

القوم: فوم طبي عالي الجودة من البولي يوريثان مضاد للحساسية.

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪

ظروف التخزين

يجب أن يتمّ التخزين في وضع الاستلقاء. وللتخزين على المدى الطويل، ضعها في مكان جاف ومعتدل الحرارة بعيدًا عن مصادر الضوء والحرارة.

الصيانة والتنظيف

هذه الوسادة من طراز SYST'AM® مصنوعة من مواد عالية الجودة. ومع ذلك، فلكي يتسنى الحفاظ على فترة صلاحية خصائصها والراحة التي تقدمها وجودة حالتها، يُرجى اتباع تعليمات التنظيف التالية بدقة:

مكونات الموصافات

القوم: فوم طبي عالي الجودة من البولي يوريثان مضاد للحساسية.

يتمس بالكثافة العالية جدًا تبلغ نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون 0٪